


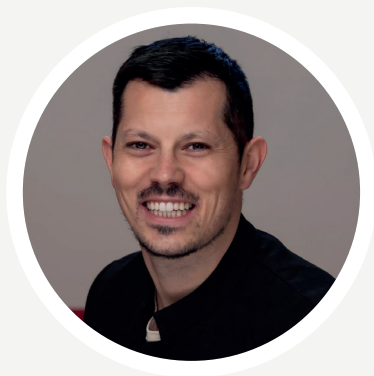

Dott. Edoardo Yang
Fossati

FitStrip per rimuovere gli eccessi in Injection

Uno dei problemi principali eseguendo una faccetta in composito tramite injection technique è il rischio di avere dei punti di contatto scorretti o addirittura completamente chiusi. Generalmente si utilizzano strisce abrasive di ogni tipo, rischiando di alterare il profilo di emergenza progettato nel wax-up.

Una soluzione estremamente efficace è l'utilizzo del fFitstrip e partendo con l'inserito grigio che, avendo lati non lavoranti ed un "seghetto" sulla sua sommità, è in grado di aprire delicatamente i punti di contatto chiusi. Successivamente la scelta tra diversi spessori e granulometria dei diversi inserti del Fitstrip permette di gestire in modo ottimale i punti di contatto.



FitStrip per rimuovere gli eccessi in Injection




Elemento 2.2 conoide sul quale si decide di optare per una faccetta in composito



Il trattamento scelto prevede una tecnica ad iniezione utilizzando un composito fluido



Isolamento dei denti adiacenti attraverso nastro di PTFE.

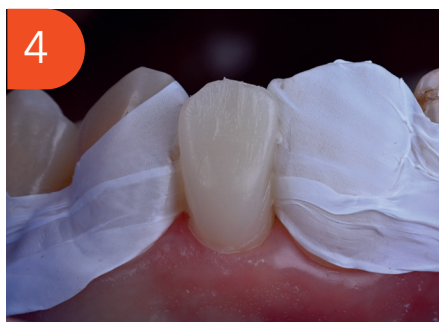

Il composito fluido viene iniettato per completare la faccetta diretta

Garrison

FROM THE LEADER IN MATRIX SYSTEMS



FitStrip per rimuovere gli eccessi in Injection



Per aprire i punti di contatto chiusi viene scelto l'inserto grigio del Fitstrip




Il composito fluido viene iniettato per completare anche la faccetta diretta sul 2.3



Lo stesso inserto grigio di Fitstrip è stato utilizzato per aprire il punto di contatto



A volte potrebbe essere utile lucidare l'area prossimale del nostro restauro utilizzando l'inserto rosso di Fitstrip

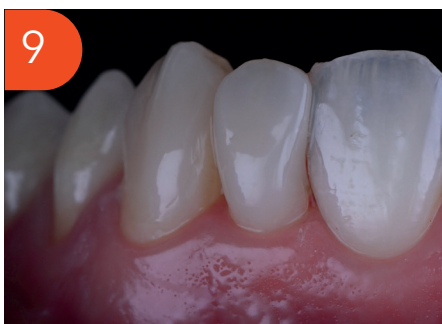

Il risultato finale dopo 1 mese dall'esecuzione del restauro