

Cleanic®

La pasta per profilassi “one step”



TUTTO IN UNO

Pasta per profilassi universale che garantisce risultati straordinari



TECNOLOGIA BREVETTATA CON PARTICELLE DI PERLITE

Variabilità di abrasione integrata



SCIENTIFICAMENTE TESTATA

Massima pulizia e lucidatura con bassa abrasione di smalto e dentina



RISPARMIO DI TEMPO

Dalla pulizia alla lucidatura in una sola fase



Cleanic è l'unica pasta per profilassi “one step” che garantisce straordinari risultati di pulizia e lucidatura con bassa abrasione dei denti in una procedura monofase, grazie alla variabilità di abrasione integrata, clinicamente testata, delle particelle di perlite naturale.



I PUNTI DEBOLI DELLE PASTE PER PROFILASSI TRADIZIONALI...

Le paste tradizionali, in genere a base di pomice, sono aggressive su smalto, dentina e otturazioni, causando:



Richiedono inoltre un doppio lavoro, perché sono necessarie almeno due paste con granulometrie diverse per ottenere risultati soddisfacenti. Ne consegue che spesso la fase di lucidatura viene omessa dalla procedura nel tentativo di risparmiare tempo, ma in seguito la superficie non lucidata risulta più esposta alla decolorazione e all'accumulo di placca.

PERCHÉ CLEANIC È DIVERSA?

Cleanic è una pasta per profilassi straordinaria, basata su una tecnologia con particelle di perlite, che consente di eseguire **pulizia e lucidatura in un'unica fase**.

Pulizia e lucidatura vengono eseguite in modo delicato ma efficace in un'unica sessione, con una sola pasta.



Cleanic disponibile in 5 gusti



Frutti Rossi



Menta



Mela Verde



Light



Menta Senza Fluoruro

VARIABILITÀ DI ABRASIONE INTEGRATA


Le particelle di perlite vulcanica (silice naturale) adattano la propria abrasività nel corso della procedura.

PULIZIA

Quando Cleanic viene applicata sulla superficie del dente si comporta dapprima come una pasta a granulometria grossa. È questa la fase di massima forza pulente di Cleanic.


LUCIDATURA

Sotto effetto del carico, nel giro di pochi secondi le particelle abrasive si frantumano e i loro bordi taglienti si arrotondano e si smussano. A questo punto la pasta esegue un'efficace lucidatura a specchio.

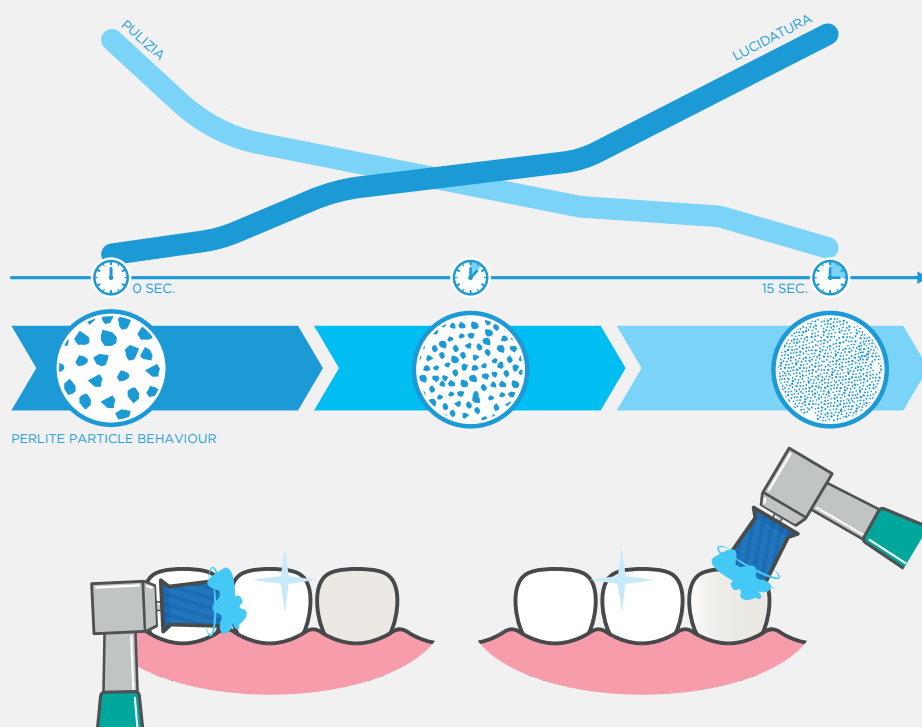

COME USARE CLEANIC

Applicare la pasta su pochi denti alla volta (circa 3 denti) usando una cappetta in gomma (Pro-Cup) per eseguire l'intera procedura, dalla pulizia alla lucidatura, in un'unica fase. Applicare quindi una nuova porzione di pasta Cleanic sul gruppo successivo di denti.

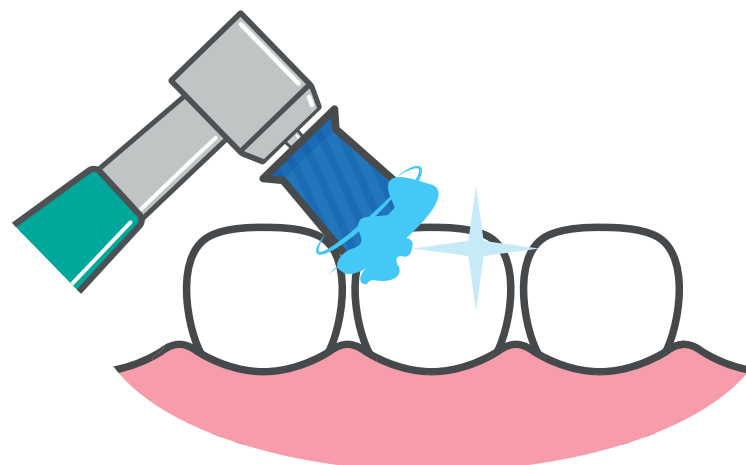

PER DENTATURA NORMALE

Lavorare a partire dalla superficie incisale/occlusale di ciascun dente e procedere verso l'area gengivale; in questo modo si riduce al minimo l'abrasione sul dente.

PER DENTINA O SUPERFICI RADICOLARI ESPOSTE

Iniziare applicando una porzione di pasta fresca sulla superficie dello smalto. Spostare quindi la pasta usata (e quindi meno aggressiva) verso la dentina o le superfici radicolari esposte.

ORDINATE CLEANIC ORA!

Art. N°	Descrizione	Contenuto	Fluoruro	RDA	REA	Gusto	Mentolo	Colore Pasta
3110	Cleanic Cartridge Refill Packs	200g	0.15% CaF	27	3.4	Menta	Si	Blu chiaro
3130	Cleanic Cartridge Refill Packs	100g	0.15% CaF	27	3.4	Menta	Si	Blu chiaro
3210	Cleanic Refill Cartridge, senza fluoruro	200g	-	27	3.4	Menta	Si	Blu chiaro
3230	Cleanic Refill Cartridge, senza fluoruro	100g	-	27	3.4	Menta	Si	Blu chiaro
3140	Cleanic Monodosi	200x 2g	0.10% NaF	27	3.4	Menta	Si	Blu scuro
3180	Cleanic in tubetto Menta	100g	0.10% NaF	27	3.4	Menta	Si	Blue
3182	Cleanic in tubetto Mela verde	100g	0.10% NaF	27	3.4	Mela verde	No	Verde
3183	Cleanic Menta senza fluoruro	100g	-	27	3.4	Menta	Si	Blu chiaro
3184	Cleanic in tubetto Light	100g	0.10% NaF	27	3.4	--	No	Grigio Chiaro
3186	Cleanic in tubetto Frutti rossi	100g	0.10% NaF	27	3.4	Frutti rossi	No	Rosa
3190	Cleanic Collection Kit	3 tubi x 100g cad. con Fluoro (gusto Menta con fluoruro, gusto Mela Verde, Light), spremitubo, bustina riutilizzabile.						

PROVATE CLEANIC CON I SUOI PARTNER IDEALI!

Pro-Cup e Pro-Cup Junior

Il profilo lamellare di queste cappette monouso evita la formazione di schizzi durante l'applicazione della pasta per profilassi e contribuisce a ridurre il surriscaldamento. Pro-Cup e Pro-Cup Junior sono prive di lattice naturale.

	CODICI E QUANTITÀ				COLORI	DESCRIZIONE	TIPO		MONO-USO
	ART. N°	QTY	ART. N°	QTY			LATCH	SCREW	
Pro-Cup	990/30	30	990/120	120	●	Pro-Cup - Morbida	✓		✓
	991/30	30	991/120	120	●	Pro-Cup - Dura	✓		✓
	1810/30	30	1810/120	120	●	Pro-Cup - Morbida		✓	✓
	1811/30	30	1811/120	120	●	Pro-Cup - Dura		✓	✓
Pro-Cup Junior	992/30	30	992/120	120	●	Pro-Cup Junior - Morbida	✓		✓
	993/30	30	993/120	120	●	Pro-Cup Junior - Dura	✓		✓
	1812/30	30	1812/120	120	●	Pro-Cup Junior - Morbida		✓	✓
	1813/30	30			●	Pro-Cup Junior - Dura		✓	✓



Porta-pasta Kerr

Disponibili in due versioni, monouso e riutilizzabili, questi porta-pasta ergonomici si adattano facilmente alle dita e offrono spazio/volume sufficiente a contenere anche grandi quantitativi di pasta (quando/se necessario).

Anelli portapasta - Monouso / Non autoclavabile

Art. N°	Descrizione
985	Anelli portapasta – Blu – Confezione da 100
986	Anelli portapasta – Colori Assortiti – Confezione da 100

Prophy Clips - Autoclavabile

Art. N°	Descrizione
3151	Prophy Clips – Confezione da 6