


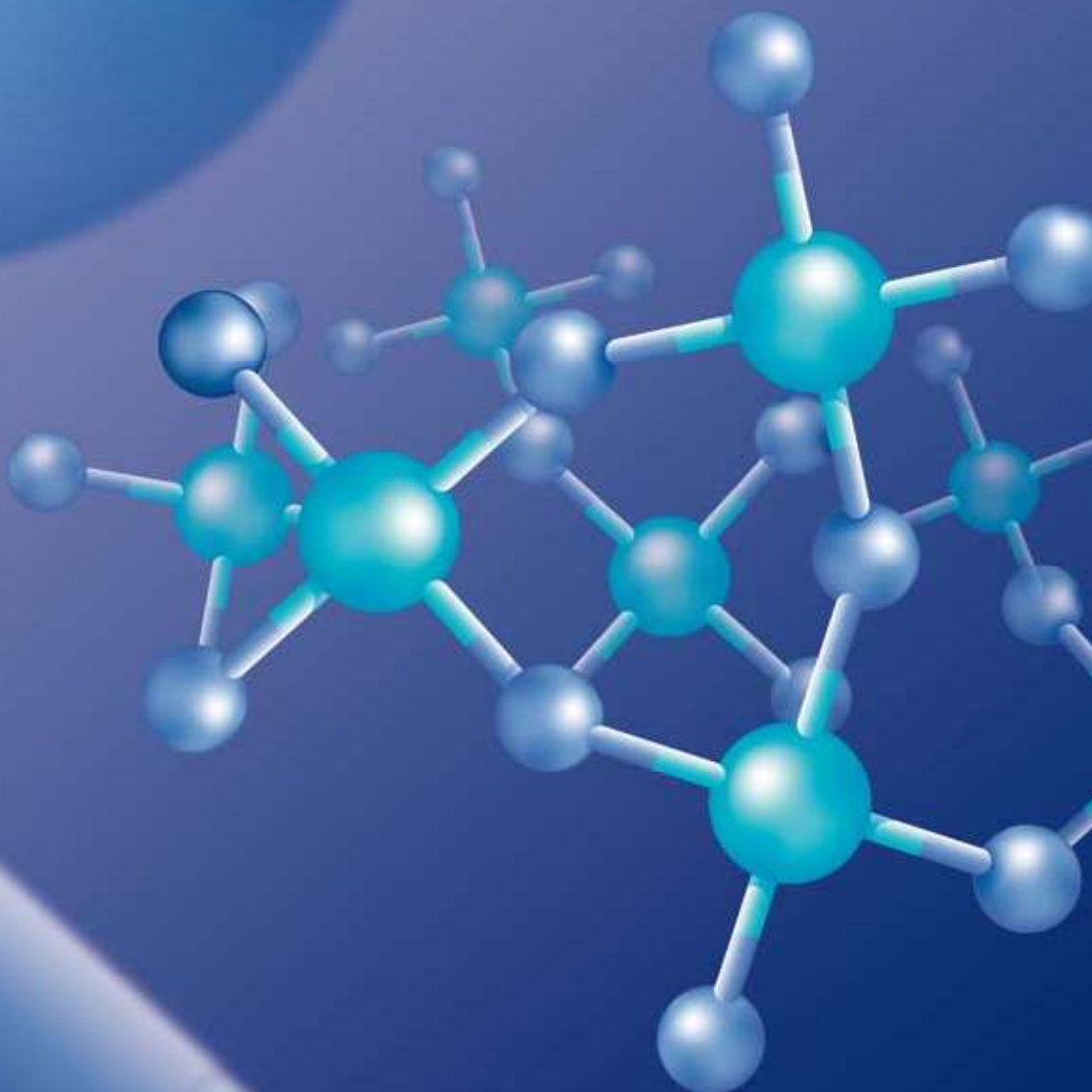

Futurabond® U

ADESIVO UNIVERSALE A DOPPIA POLIMERIZZAZIONE

Negli ultimi anni, i progressi nell'ambito dell'odontoiatria adesiva sono stati notevoli. VOCO ha lavorato costantemente e meticolosamente sul fronte di questa innovazione. Dietro Futurabond U vi è un intenso processo di ricerca e sviluppo con un obiettivo preciso: offrire un adesivo universale, dando al professionista vantaggi e affidabilità ed eliminando la necessità di altri sistemi adesivi all'interno dello studio. Futurabond U impone nuovi standard nell'ambito della forza adesiva, soprattutto grazie alla sua applicazione flessibile e versatile.

Esclusivamente universale

Con Futurabond U in SingleDose, ora VOCO presenta sul mercato l'unico adesivo universale a doppia polimerizzazione in blister monouso. Oltre all'utilizzo incredibilmente semplice delle SingleDose, il nuovo Futurabond U offre ai professionisti un'ampia gamma di opzioni per l'applicazione, sia per quanto riguarda le indicazioni sia per la scelta della tecnica di mordenzatura o la modalità di polimerizzazione. Automordenzatura, mordenzatura selettiva o mordenzatura totale: Futurabond U permette al professionista di scegliere liberamente come condizionare il tessuto duro dentale, in base al singolo caso clinico e al modo preferito di operare.

Applicato in un solo strato, questo nuovo adesivo universale crea un legame forte con lo smalto e la dentina, assicurando un'adesione duratura e priva di gap tra il tessuto duro dentale e il materiale da restauro. Nello stesso tempo, offre


un'adesione salda a materiali diversi, come metallo, ceramici e all'ossido di zirconio / alluminio e silicate senza ulteriore primer. Garantisce un'eccezionale forza adesiva anche in caso di polimerizzazione chimica, rendendo così Futurabond U ideale per la cementazione di perni radicolari.

La storia di successo di Futurabond®

VOCO amplia con successo la linea Futurabond con l'innovativo Futurabond U. Essendosi distinti in numerosi studi, Futurabond NR, DC e M si sono imposti nella pratica clinica come comprovati agenti adesivi. Futurabond U garantisce eccellenti proprietà fisiche, dando al professionista la sicurezza dell'utilizzo di un solo adesivo e che questo adesivo universale sia un partner veramente affidabile che garantisce una forza adesiva stabile.

Applicazione one step – adesione sicura

L'innovativa formulazione di Futurabond U insieme alle particelle di SiO_2 altamente funzionalizzate sono la base delle eccezionali proprietà del film di adesivo. L'adesivo può bagnare in modo ottimale le fibre di collagene esposte e la struttura mordenzata micro-ritentiva dello smalto. Durante la polimerizzazione, gli zaffi di resina che raggiungono i tubuli dentinali induriscono e rafforzano la forza ritentiva dello strato ibrido che aderisce alle fibre di collagene. L'affidabile formazione di questi zaffi nella dentina è la miglior protezione contro la sensibilità post-operatoria.

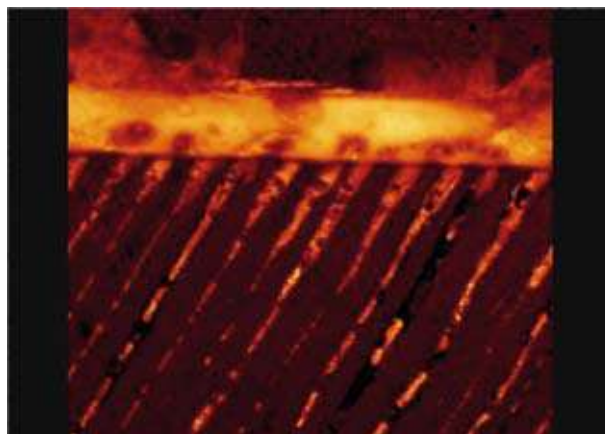

Fonte: Priv.-Doz. Dr.-Ing. Ulrich Lohbauer, University of Erlangen, 2013

Futurabond® U

UN ADESIVO PER OGNI GASO

Libera scelta della tecnica di mordenzatura

Automordenzatura



Mordenzatura selettiva



Mordenzatura totale



Ampio spettro di indicazioni

Restauri diretti di cavità di tutte le classi e ricostruzione di monconi con qualunque composito a base di metacrilato fotopolimerizzabile, a doppia polimerizzazione o autopolimerizzante

Restauri indiretti in composito a base di metacrilato fotopolimerizzabile, a doppia polimerizzazione o autopolimerizzante

Riparazioni intraorali di otturazioni, faccette in ceramica e restauri in ceramica integrale senza aggiunta di un ulteriore primer

Trattamento di **colletti dentali ipersensibili**

Vernice protettiva per restauri in cemento vetroionomerico

Sigillo di cavità prima di restauri in amalgama o prima di cementazione provvisoria

Cementazione di perni radicolari con cementi adesivi a doppia polimerizzazione o autopolimerizzanti




Futurabond® U

APPLICAZIONE SEMPLICE – TEMPO DI LAVORAZIONE DI SOLI 35 SECONDI

Restauro diretto



Restauro indiretto

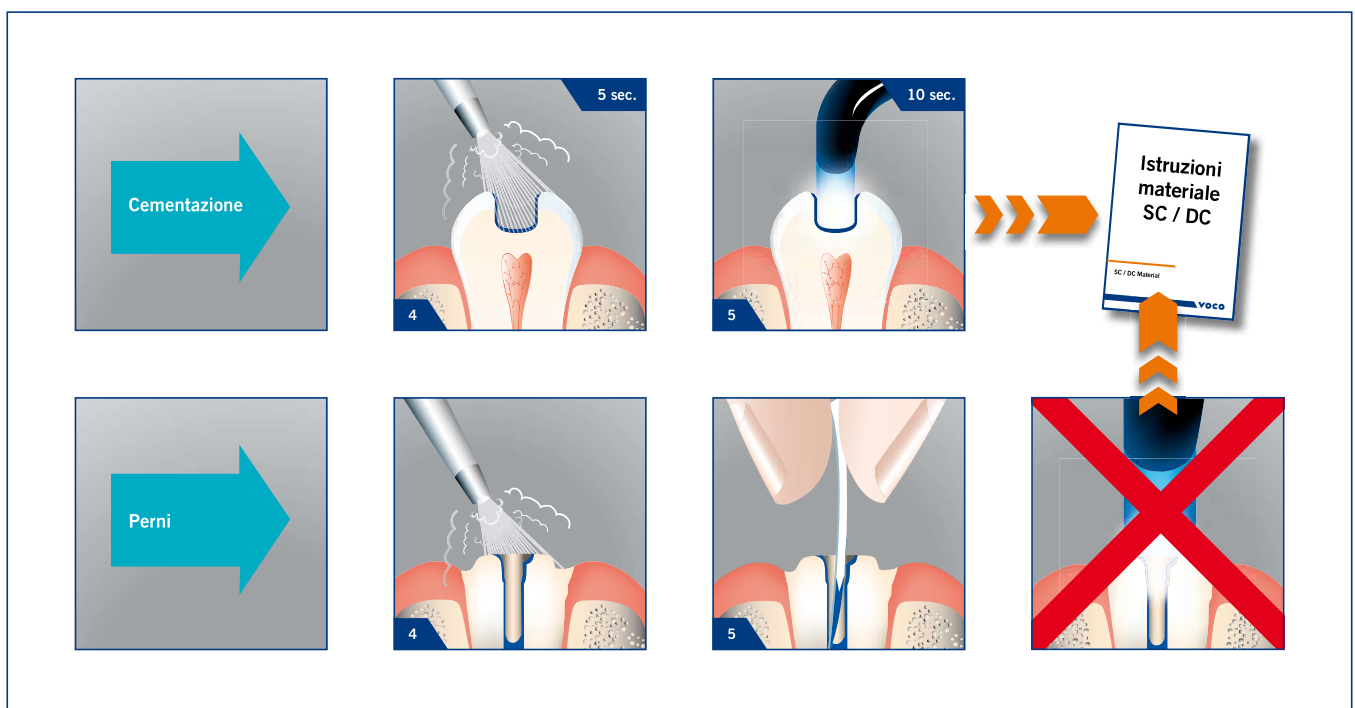

Futurabond® U

UN ADESIVO PER OGNI CASO


	Futurabond® U (VOCO)	Scotchbond Universal* (3M ESPE)	All-Bond Universal* (Bisco)	Prime&Bond elect* (Dentsply)	iBond SE* (Heraeus)	Syntac* with Heliobond* (Ivoclar Vivadent)
Automordenzatura, mordenzatura selettiva e totale	✓	✓	✓	✓	–	–
Restauri diretti	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Restauri indiretti	✓	✓ ¹⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ³⁾	✓
Compatibile con tutti i compositi fotopolimerizzabili, a doppia polimerizzazione o autopolimerizzanti	✓	✓ ¹⁾	✓	–	–	✓
Doppia polimerizzazione in single dose	✓	–	–	–	–	–
Applicazione rapida in un solo strato	✓	✓	–	✓	✓	–

1) Solo con Scotchbond Universal DCA* (attivatore per doppia polimerizzazione) o RelyX Ultimate*

2) Solo con Self Cure Activator*

3) Solo in combinazione con cementi adesivi fotopolimerizzabili

Resistenza alla forza del taglio a smalto e dentina, prima e dopo ciclo termico (tc)

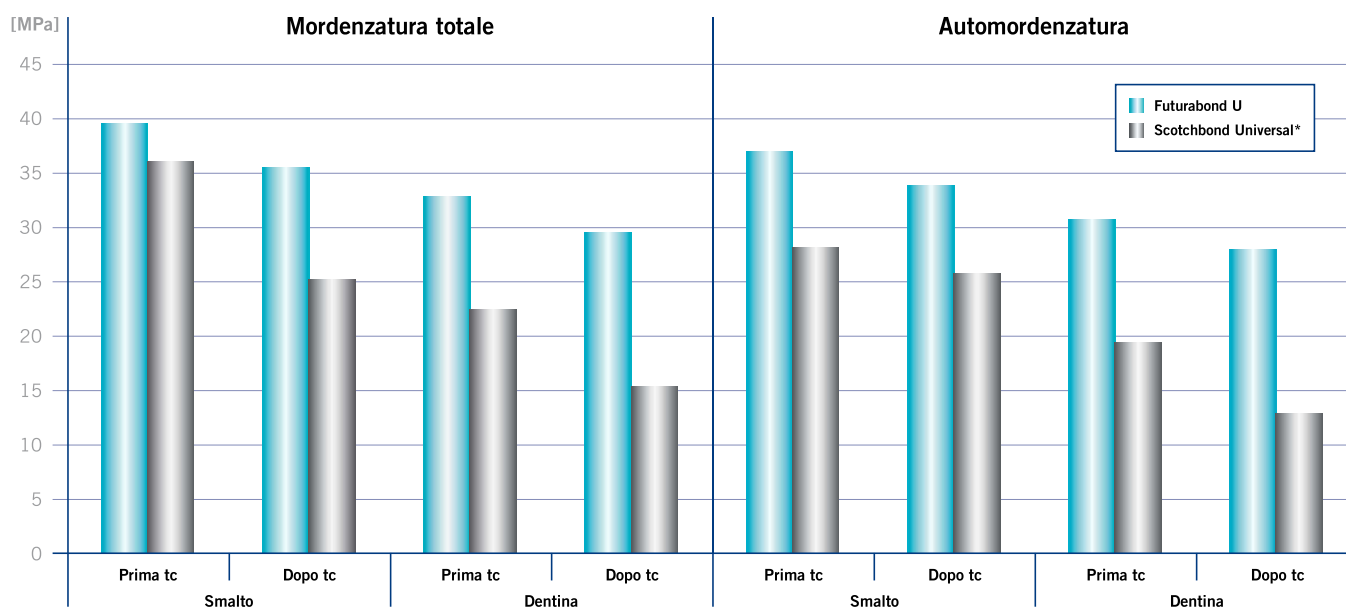

Fonte: A. Abdalla, report a VOCO GmbH, 2013

*Scotchbond Universal, All-Bond Universal, Prime&Bond elect, iBond SE, Syntac, Heliobond, Scotchbond Universal DCA, RelyX Ultimate e Self Cure Activator non sono marchi registrati di VOCO GmbH.

Futurabond® U

ADESIVO UNIVERSALE A DOPPIA POLIMERIZZAZIONE

Indicazioni

Restauri diretti e indiretti con qualunque composito, materiale per la ricostruzione di monconi, cemento adesivo a base di metacrilato fotopolimerizzabile, a doppia polimerizzazione o autopolimerizzante

Riparazioni intraorali di otturazioni, faccette in ceramica e restauri in ceramica integrale senza aggiunta di primer

Trattamento di colletti dentali ipersensibili

Vernice protettiva per restauri in cemento vetroionomerico

Sigillo di cavità prima di restauri in amalgama o prima di cementazione provvisoria

Cementazione di perni radicolari con cementi adesivi a doppia polimerizzazione o autopolimerizzanti



Futurabond® U nelle pratiche *SingleDose*

- Facile, veloce e igienico – blister ad attivazione one-step
- Non sono necessari altri dispositivi
- Nessuna fuoriuscita in qualunque posizione

Vantaggi

- Un adesivo per ogni caso – non sono necessari altri adesivi
- Automordenzatura, mordenzatura selettiva o totale – a voi la scelta
- Eccezionale versatilità di applicazione
 - per restauri diretti e indiretti
 - pienamente compatibile con tutti i compositi a base di metacrilato fotopolimerizzabili, a doppia polimerizzazione o autopolimerizzanti, senza ulteriore attivatore DC
 - adesione sicura a diversi materiali come metallo, ossido di zirconio e alluminio, nonché ceramiche silicate, senza ulteriore primer
- Applicabile in un solo strato – tempo di lavorazione di soli 35 secondi
- Viscosità ottimale, quindi facile applicazione
- Eccezionale adesione rispetto ad altri adesivi universali, automordenzanti o a mordenzatura totale
- Tollera l'umidità
- Non è necessario la conservazione in frigorifero

Confezionamento

- | | |
|----------|---|
| REF 1571 | <i>SingleDose</i> 50 pz., accessori |
| REF 1572 | <i>SingleDose</i> 200 pz., accessori |
| REF 1574 | <i>SingleDose</i> campione (<i>SingleDose</i> 20 pz., Vococid gel siringa 2 ml, accessori) |

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germania

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.it

Disponibile presso:

