

La soluzione semplice di cui ti puoi fidare



OptiBond™ Universal

Single-Component Universal Adhesive

UN SOLO PASSAGGIO. UN SOLO MARCHIO. QUALSIASI PROCEDURA.

Ecco OptiBond™ Universal: l'agente adesivo monocomponente combina l'affidabilità della tecnologia brevettata OptiBond GPDM con la facilità d'uso di una soluzione universale. Una forza di adesione efficace e affidabile su ogni superficie e substrato con qualsiasi tecnica di mordenzatura.

Finalmente efficacia e flessibilità in un unico prodotto.

SEMPLICITÀ SENZA COMPROMESSI

OptiBond Universal è stato progettato per aiutare i dentisti di tutti gli Studi a perseguire risultati di qualità.

Con alle spalle una storia ricca di successi clinici, OptiBond garantisce elevata resistenza, protezione contro microperdite e versatilità completa in un solo flacone.



ROBUSTEZZA COLLAUDATA.

La tecnologia brevettata, che unisce il monomero OptiBond GPDM e l'innovativo Ternary Solvent System di Kerr, offre un'affidabile efficacia adesiva sia allo smalto sia alla dentina.



PROTEZIONE CONTRO LA SENSIBILITÀ POST-OPERATORIA.

La profonda penetrazione nei tubuli dentinali garantita dalle proprietà idrofile di OptiBond Universal protegge il dente da microperdite e migliora la protezione contro la sensibilità post-operatoria.



VERSATILITÀ TOTALE.

OptiBond Universal offre la possibilità di fare affidamento su una tecnologia collaudata per substrati e tecniche diversi, dalla mordenzatura totale, all'automordenzatura, fino alla mordenzatura selettiva, in un solo flacone.



UN SOLO FLACONE. UN SOLO STRATO.

La bellezza di OptiBond Universal risiede nella sua semplicità. La formula avanzata riunisce primer, adesivo e mordenzante in un solo flacone ed è efficace con un solo strato.



PROFONDE RADICI FAMILIARI.

Con alle spalle una tradizione di oltre 20 anni di successi clinici, il nome OptiBond rappresenta lo standard di riferimento in termini di adesione, prestazioni affidabili e soluzioni orientate ai clienti.

UNA TECNOLOGIA: TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO.

La formula brevettata di Kerr è arricchita con il nostro monomero GPDM e con l'innovativo Ternary Solvent System che consente un'efficace mordenzatura dello smalto favorendo al contempo priming e sigillatura della dentina. Il risultato è una tecnica più affidabile e meno sensibile.



IL GOLD STANDARD NELL'ADESIONE.

Il comprovato monomero OptiBond™ GPDM garantisce un'adesione efficace e affidabile sia alla struttura del dente sia al materiale in resina. Contiene un gruppo fosfato acido che si ancora efficacemente alla superficie idrofila del dente e due gruppi funzionali di metacrilato per un'efficace interfaccia con la resina idrofobica. Ciò crea una compatibilità ottimale con i substrati e una forza di adesione complessiva più elevata.¹



TRE SOLVENTI IN UNO

Per aggiungere affidabilità e ridurre la sensibilità tecnica, l'adesivo dentale OptiBond Universal sfrutta il Ternary Solvent System di Kerr:

- **L'ACQUA** migliora il potere mordenzante e la capacità di umidificazione, agevolando la penetrazione dell'adesivo nei tubuli dentinali.
- **L'ACETONE** potenzia la stabilità della durata utile e aumenta l'acidità e la mordenzatura durante l'applicazione grazie alla sua rapida evaporazione.
- **L'ETANOLO** facilita la formazione di uno strato adesivo omogeneo, risultando in un'applicazione meno sensibile alla tecnica.

PRESTAZIONI SUPPORTATE DALL'EVIDENZA.



La ricostruzione della struttura del dente interessa substrati con diverse peculiarità e problematiche.

OptiBond Universal è in grado di gestire queste complessità con risultati clinici affidabili. La soluzione dimostra una maggiore resistenza su vari substrati e una maggiore efficacia nella penetrazione dei tubuli dentinali e nella mordenzatura dello smalto.




FORZA DI ADESIONE A SMALTO E DENTINA

OptiBond Universal presenta un'efficace forza di adesione sia alla dentina sia allo smalto. Crea la massima flessibilità dimostrando grandi risultati in diverse tecniche di mordenzatura.

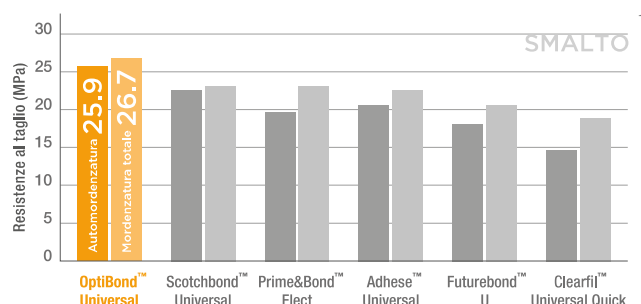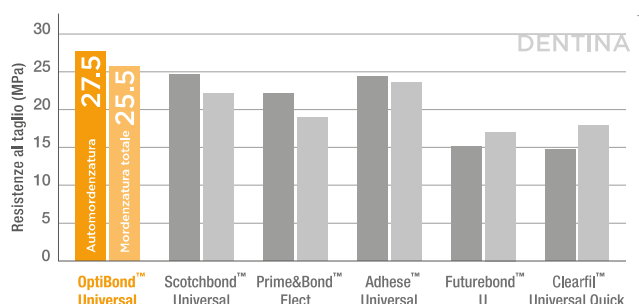


MORDENZATURA DI SMALTO NON TAGLIATO

L'esclusiva capacità di nanoetching crea una superficie mordenzata più profonda per una maggiore ritenzione meccanica.

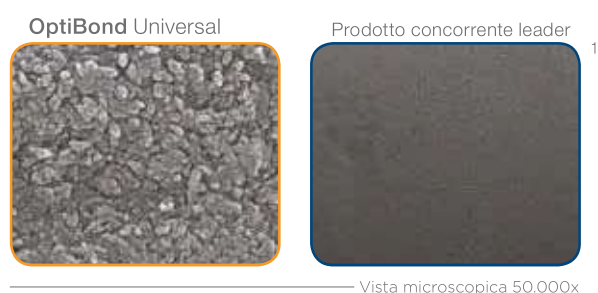

PENETRAZIONE NEI TUBULI DENTINALI


La penetrazione profonda nei tubuli dentinali migliora la protezione contro la sensibilità post-operatoria e favorisce la forza di adesione.

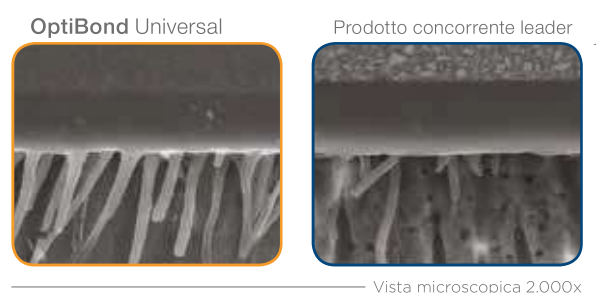




FORZA DI ADESIONE SU VARI SUBSTRATI DENTALI

La combinazione di OptiBond Universal con il cemento adesivo universale NX3 favorisce elevati livelli di forza di adesione indiretta su vari substrati dentali, senza la necessità di un primer ceramico o metallico separato.

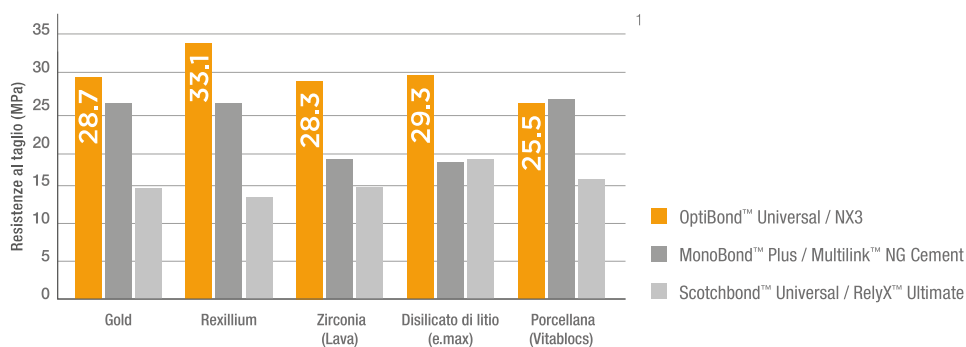

FORZA DI ADESIONE CON CEMENTO

L'uso combinato di OptiBond Universal con il cemento NX3 migliora la compatibilità dell'adesione e promuove elevati livelli di forza di adesione indiretta alla dentina.

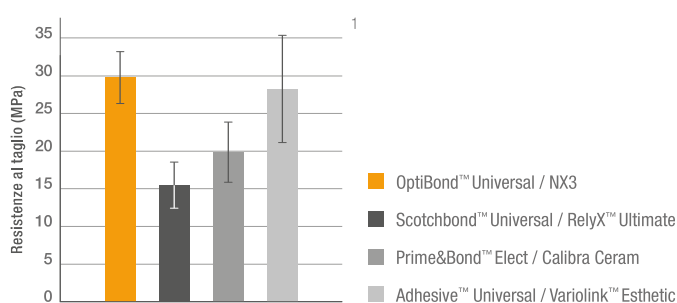

RESTA SINTONIZZATO

Prodotti versatili, comunicazioni versatili. Sono molti i modi per rimanere in contatto con Kerr Dental e ricevere aggiornamenti su novità e sviluppi.



Entra nella nostra rete
tramite i canali social



Ricevi aggiornamenti
iscrivendoti alla nostra newsletter



Parlaci
tramite i nostri consulenti locali



Scopri le novità
visitando il nostro sito Web



OptiBond™ e OptiBond™ Universal sono marchi registrati o marchi di Kerr Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Prova OptiBond Universal gratuitamente
www.kerrdental.com/semplimente-universal



OptiBond Universal - Kits

REF/Cod. Art.	Descrizione
36517	OptiBond Universal - Kit flaconi - 5 ml
36518	OptiBond Universal - Kit Unidose - 100 pezzi

OptiBond Universal - Refills

REF/Cod. Art.	Descrizione
36519	OptiBond Universal - Flacone di ricarica da 5 ml
31297	Gel Etchant - Siringhe di ricarica da 3 g - 3 pezzi
26909	Gel Etchant - Puntali applicatori