


SONICflex™ Libro delle punte


Panoramica delle punte KaVo SONICflex



KAVO

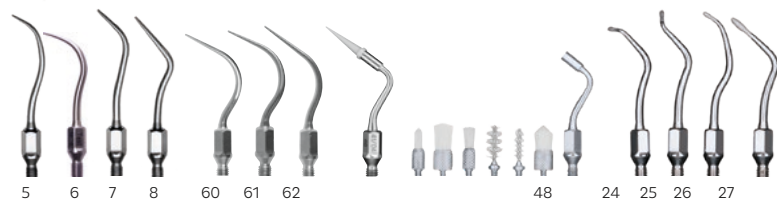


Scaler | | Paro | Implant | Clean | | Rootplaner

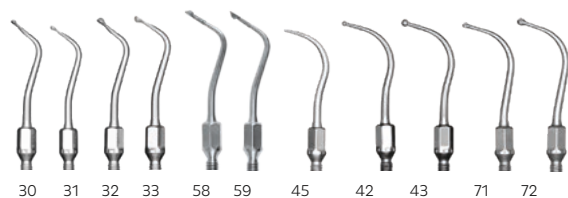

Micro | | Bevel | Seal | | Cariex



Endo | | Retro

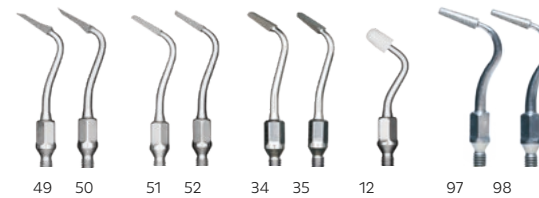

Gold | | Ceram | CAD/CAM | CEM | | Crown

**SONICflex –
L'eccellente tutto-fare
adatto a quasi tutte le
indicazioni.**

Grazie alla sua versatilità, KaVo SONICflex diventerà presto uno dei tuoi strumenti più utilizzati. Con più di 50 punte, facili e veloci da sostituire, si adatta alle esigenze dell'operatore e si può utilizzare in numerose applicazioni.



SONICflex™

Panoramica del manipolo.



Il tuo vantaggio quotidiano in termini di prestazioni.

KaVo SONICflex è l'ablatore ad aria più potente e silenzioso della sua classe. Lo strumento con il più ampio spettro di applicazioni.

Agevola il tuo lavoro con livelli di prestazioni regolabili, per ogni indicazione – robusto e preciso.

Tecnologia superiore – Caratteristiche e vantaggi principali:

- Tre impostazioni delle prestazioni – condizioni di lavoro ottimali, per ogni indicazione
- Considerevolmente più silenzioso rispetto ai modelli simili proposti dalla concorrenza (fino a 15 dB): meno stress per i professionisti e i loro pazienti
- Non richiede attrezzature aggiuntive: è sufficiente collegarlo a KaVo MULTIflex o all'attacco Sirona
- Illuminazione ottimale: 25.000 lux – per una visualizzazione nitida senza affaticare gli occhi
- Nota qualità KaVo – SONICflex 2008 L rappresenta l'ablatore di terza generazione di KaVo, frutto di conoscenza ed esperienza decennali

PROFILASSI

Importanti informazioni sui codici articolo:

XX: Punta per SONICflex 2003/2000 (filettatura lunga)
XXA: Punta per SONICflex 2008 (filettatura corta)

Punta SONICflex scaler n. 5 / 5A

Trattamento: per la rimozione di ampie aree di tartaro
 Forma: universale



Numero d'ordine: Punta scaler n. 5
 Punta scaler n. 5A

0.571.5171
 1.005.8949

Punta SONICflex scaler n. 8 / 8A

Trattamento: per la rimozione di tartaro supragengivale e sottogengivale
 Forma: perio, extra lungo



Numero d'ordine: Punta scaler n. 8
 Punta scaler n. 8A

0.571.5371
 1.006.1953

Punta SONICflex scaler n. 6 / 6A

Trattamento: per la rimozione di ampie aree di tartaro supragengivale
 Forma: a falce




Numero d'ordine: Punta scaler n. 6
 Punta scaler n. 6A

0.571.5181
 1.005.8950

Punta SONICflex clean n. 48 / 48 A

Trattamento: rimozione della placca, pulizia dei solchi, pulizia delle cavità e preparazione delle corone
 Forma: numerosi accessori, spazzolini monouso

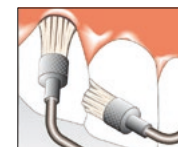


Numero d'ordine: Punta n. 48
 Punta n. 48°
 Spazzolino clean n. 1
 Spazzolino clean n. 2
 Spazzolino clean n. 3
 Spazzolino clean n. 4
 Spazzolino clean n. 5
 Spazzolino clean n. 6

0.571.0401
 1.006.1982
 0.571.0402
 0.571.0412
 0.571.0422
 0.571.0432
 0.571.0472
 0.571.0482

Punta SONICflex scaler n. 7 / 7A

Trattamento: per la rimozione di ampie aree di tartaro supragengivale
 Forma: perio

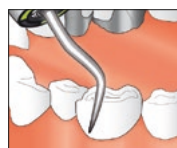


Numero d'ordine: Punta scaler n. 7
 Punta scaler n. 7A

0.571.5191
 1.005.8951

PARODONTOLOGIA

Punta SONICflex paro n. 60 / 60A

Trattamento: pulizia delicata delle tasche durante il trattamento parodontale; pulizia efficace nelle tasche fino a 9 mm di profondità; per il settore anteriore, superfici lisce
 Forma: punta lunga, dritta - superficie arrotondata

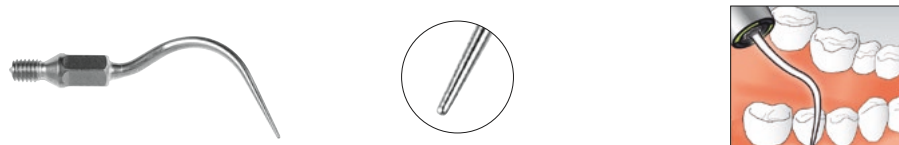


Numero d'ordine: Punta paro n. 60
 Punta paro n. 60°

0.571.7402
 1.006.1934

Punta SONICflex paro n. 61 / 61A

Trattamento: pulizia delicata delle tasche durante il trattamento parodontale; pulizia efficace nelle tasche fino a 9 mm di profondità; per premolari e molari
 Forma: punta angolata, **sinistra** - superficie arrotondata

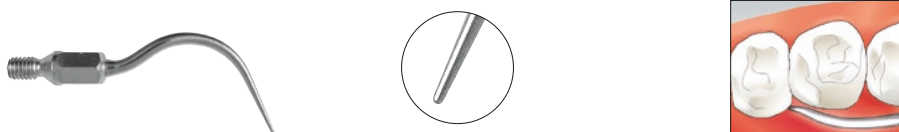

Numero d'ordine: Punta paro n. 61
 Punta paro n. 61A

0.571.7412
 1.006.1935

Punta SONICflex paro n. 62 / 62A

Trattamento: pulizia delicata delle tasche durante il trattamento parodontale; pulizia efficace nelle tasche fino a 9 mm di profondità; per premolari e molari
 Forma: punta angolata, **destra** - superficie arrotondata



Numero d'ordine: Punta paro n. 62
 Punta paro n. 62°


0.571.7422
 1.006.1936

Importanti informazioni sui
 codici articolo:

XX: Punta per SONICflex 2003/2000 (filettatura lunga)
XXA: Punta per SONICflex 2008 (filettatura corta)

Punta SONICflex implant

Trattamento: rimozione efficace delle placca e del tartaro sottogengivale attorno agli impianti
 Forma: punte coniche, base in plastica (PEEK) monouso

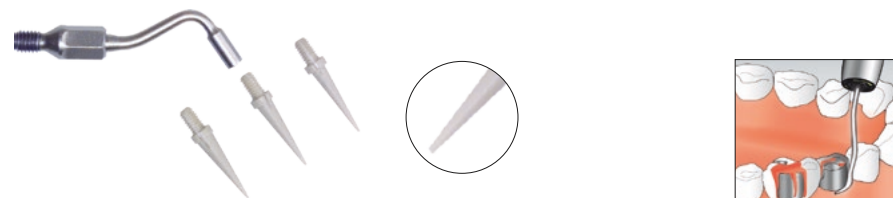

Numero d'ordine: Set Implant
 Set Implant A
 Ricambio Implant (30 pz)

1.003.8167
 1.006.2027
 1.003.8168

PARODONTOLOGIA

Punta SONICflex rootplaner n. 24 / 24A

Trattamento: sottogengivale radicolare, consente l'accesso alle forcazioni di difficile accesso, anche nei casi elementi dentali uniti
 Forma: contrangolata a estremità convessa, piccolo, **sinistro**, diamantatura D25



Numero d'ordine: Punta rootplaner n. 24
 Punta rootplaner n. 24°

0.571.5621
 1.006.1957

Punta SONICflex rootplaner n. 25 / 25A

Trattamento: sottogengivale radicolare, consente l'accesso alle forcazioni di difficile accesso, anche nei casi elementi dentali uniti
 Forma: contrangolata a estremità convessa, piccolo, **destro**, diamantatura D25



Numero d'ordine: Punta rootplaner n. 25
 Punta rootplaner n. 25°

0.571.5631
 1.006.1959

Punta SONICflex rootplaner n. 26 / 26A

Trattamento: pulizia efficace di superfici lisce e aree concave
 Forma: universale, estremità convessa, **piccolo**, diamantatura D25



Numero d'ordine: Punta rootplaner n. 26
 Punta rootplaner n. 26°


0.571.5641
 1.006.1961

Importanti informazioni sui
 codici articolo:

XX: Punta per SONICflex 2003/2000 (filettatura lunga)
XXA: Punta per SONICflex 2008 (filettatura corta)

Punta SONICflex rootplaner n. 27 / 27A

Trattamento: pulizia efficace di superfici lisce e aree concave
 Forma: paro extra lungo, estremità convessa, **grande**, diamantatura D25

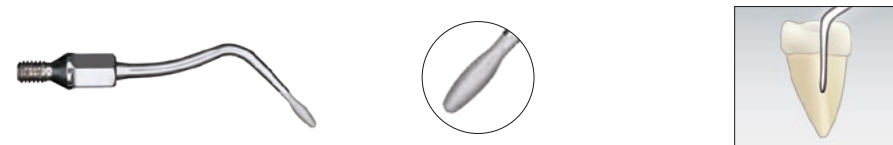


Numero d'ordine: Punta rootplaner n. 27
 Punta rootplaner n. 27A

0.571.5651
 1.006.1963

PUNTA MININVASIVA

SONICflex micro n. 30 / 30A

Trattamento: trattamento mininvasivo, per carie incipiente
Forma: piccola semisfera, **mesiale**, diamantatura D46

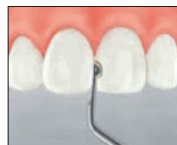


Numero d'ordine: Punta micro n. 30
Punta micro n. 30A

0.571.6811
1.006.1969

Punta SONICflex micro n. 31 / 31A

Trattamento: trattamento mininvasivo, per carie incipiente
Forma: piccola semisfera, **distale**, diamantatura D46

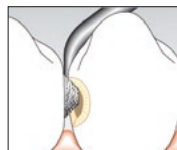


Numero d'ordine: Punta micro n. 31
Punta micro n. 31A

0.571.6801
1.006.1971

Punta SONICflex micro n. 32 / 32A

Trattamento: trattamento mininvasivo, per carie incipiente
Forma: piccola semisfera, **mesiale**, diamantatura D46

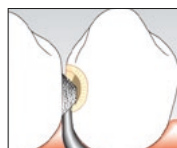

Numero d'ordine: Punta micro n. 32
Punta micro n. 32A


0.571.6831
1.006.1973

Importanti informazioni sui
codici articolo:

XX: Punta per SONICflex 2003/2000 (filettatura lunga)
XXA: Punta per SONICflex 2008 (filettatura corta)

SONICflex micro n. 33 / 33A

Trattamento: trattamento mininvasivo, per carie incipiente
Forma: piccola semisfera, **mesiale**, diamantatura D46

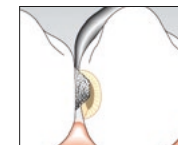


Numero d'ordine: Punta micro n. 33
Punta micro n. 33A

0.571.6821
1.006.1975

Punta SONICflex bevel n. 58 / 58A

Trattamento: smussatura dei margini delle cavità approssimali
Forma: **mesiale**, diamantatura D46

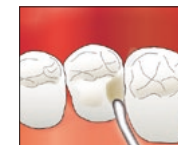

Numero d'ordine: Punta bevel n. 58
Punta bevel n. 58A

0.571.7392
1.006.1988

Punta SONICflex bevel n. 59 / 59A

Trattamento: bisellatura dei margini delle cavità approssimali
Forma: **distale**, diamantatura D46



Numero d'ordine: Punta bevel n. 59
Punta bevel n. 59A

0.571.7382
1.006.1990


PUNTA MININVASIVA

Importanti informazioni sui codici articolo:

XX: Punta per SONICflex 2003/2000 (filettatura lunga)
XXA: Punta per SONICflex 2008 (filettatura corta)

Punta conica SONICflex seal n. 45 / 45A

Trattamento: preparazione mininvasiva dei solchi, indolore durante l'apertura dei solchi
 Forma: conico, inserto dritto Ø 0,5 mm, diamantatura D46

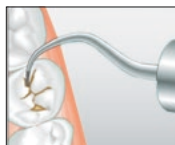


Numero d'ordine: Punta seal n. 45
 Punta seal n. 45A

1.000.8323
 1.007.1506

Punta SONICflex cariex 1,0 n. 71 / 71A

Trattamento: rimozione controllata, a strati, di tessuti cariati
 Forma: a sfera, Ø 1,0 mm, metallo duro

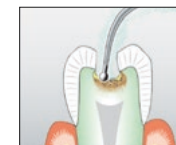


Numero d'ordine: Punta cariex TC n. 71
 Punta cariex TC n. 71A

1.000.7362
 1.006.2002

Punta SONICflex cariex 0,8 n. 42 / 42A

Trattamento: escavazione della carie ultra conservativa, sonoabrasiva, fine
 Forma: a sfera, Ø 0,8 mm, diamantatura D64

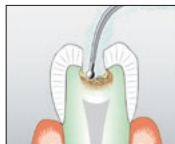

Numero d'ordine: Punta cariex D n. 42
 Punta cariex D n. 42A

1.000.7105
 1.006.1980

Punta SONICflex cariex 1,4 n. 72 / 72A

Trattamento: rimozione controllata, a strati, di tessuti cariati
 Forma: a sfera, Ø 1,4 mm, metallo duro




Numero d'ordine: Punta cariex TC n. 72
 Punta cariex TC n. 72A

1.000.7363
 1.006.2004

Punta SONICflex cariex 1,2 n. 43 / 43A

Trattamento: escavazione della carie ultra conservativa, sonoabrasiva, fine
 Forma: a sfera, Ø 1,2 mm, diamantatura D64

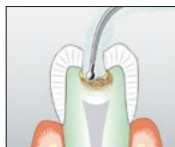

Numero d'ordine: Punta cariex D n. 43
 Punta cariex D n. 43A


1.000.7167
 1.006.1981

RESTAURO

Punta SONICflex prep gold n. 49 / 49A mesiale

Trattamento: preparazione precisa di diverse bisellature nella zona del margine dopo la "preparazione grossolana" effettuata con lo strumento rotante; in questo modo è possibile un miglior restauro dentale

Forma: **mesiale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60°, cervicale - 30°, diamantatura D46

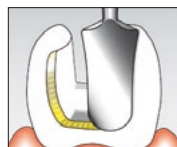


Numero d'ordine: Punta prep gold n. 49
Punta prep gold n. 49A

0.571.7212
1.006.1983

Punta SONICflex prep gold n. 50 / 50A distale

Trattamento: preparazione precisa di diverse bisellature nella zona del margine dopo la "preparazione grossolana" effettuata con lo strumento rotante; in questo modo è possibile un miglior restauro dentale

Forma: **distale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60°, cervicale - 30°, diamantatura D46

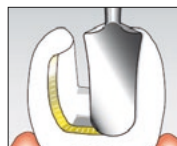

Numero d'ordine: Punta prep gold n. 50
Punta prep gold n. 50A

0.571.7222
1.006.1984

Punta SONICflex prep ceram n. 51 / 51A

Trattamento: preparazione precisa di diverse bisellature nei bordi marginali, passaggi armonici delle zone del margine cervicale e laterale

Forma: **mesiale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60°, cervicale - 75°, diamantatura D46



Numero d'ordine: Punta prep ceram n. 51
Punta prep ceram n. 51A

0.571.7262
1.006.1985

Importanti informazioni sui
codici articolo:


XX: Punta per SONICflex 2003/2000 (filettatura lunga)

XXA: Punta per SONICflex 2008 (filettatura corta)

Punta SONICflex prep ceram n. 52 / 52A

Trattamento: preparazione precisa di diverse bisellature nei bordi marginali, passaggi armonici delle zone del margine cervicale e laterale

Forma: **distale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60°, cervicale - 75°, diamantatura D46

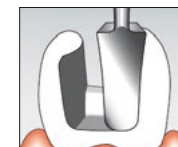

Numero d'ordine: Punta prep ceram n. 52
Punta prep ceram n. 52A

0.571.7272
1.006.1986

RESTAURO

Punta SONICflex prep CAD/CAM n. 34 / 34A

Trattamento: perfetto adattamento della preparazione della cavità ai processi tecnici nei sistemi CAD/CAM

Forma: **mesiale**, angolo laterale 30°, angolo cervicale 90°, diamantatura D46



Numero d'ordine: Punta prep CAD/CAM n. 34
Punta prep CAD/CAM n. 34A



1.002.1984
1.006.1977


Punta SONICflex prep CAD/CAM n. 35 / 35A

Trattamento: perfetto adattamento della preparazione della cavità ai processi tecnici nei sistemi CAD/CAM

Forma: **distale**, angolo laterale 30°, angolo cervicale 90°, diamantatura D46



Numero d'ordine: Punta prep CAD/CAM n. 35
Punta prep CAD/CAM n. 35A

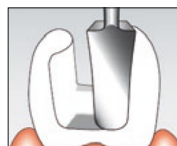

1.002.1986
1.006.1979

Importanti informazioni sui
codici articolo:

XX: Punta per SONICflex 2003/2000 (filettatura lunga)


XXA: Punta per SONICflex 2008 (filettatura corta)

Punta SONICflex CEM n. 12 / 12A

Trattamento: inserimento delicato e sicuro di inlay
cappetta protettiva in plastica smussata



Numero d'ordine: Punta CEM n. 12 con 1 attacco CEM
Punta CEM n. 12A con 1 attacco CEM
Attacco CEM

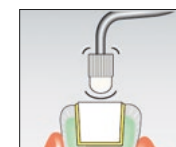

0.571.5431
1.006.2021
0.571.7142


Punta SONICflex prep crown n. 97 / 97A

Trattamento: preparazione di monconi protesici - ideale per questa indicazione è la combinazione di strumenti rotanti per la preparazione di monconi protesici e inserti sonici di forma simile

Forma: raggio, diamantatura D46



Numero d'ordine: Punta prep crown n. 97
Punta prep crown n. 97A

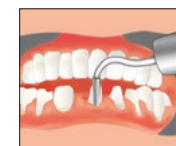

1.008.6383
1.008.6384


Punta SONICflex prep crown n. 98 / 98A

Trattamento: preparazione di monconi protesici - ideale per questa indicazione è la combinazione di strumenti rotanti per la preparazione di monconi protesici e inserti sonici di forma simile

Forma: piatta, diamantatura D46



Numero d'ordine: Punta prep crown n. 98
Punta prep crown n. 98A

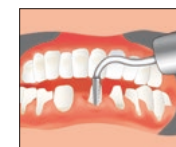

1.008.6385
1.008.6386

RESEZIONE APICALE

Importanti informazioni sui codici articolo:

XX: Punta per SONICflex 2003/2000 (filettatura lunga)
XXA: Punta per SONICflex 2008 (filettatura corta)

Punta SONICflex retro n. 56 / 56A

Trattamento: ricerca/localizzazione del canale radicolare, significativa semplificazione del lavoro durante la preparazione di cavità retrograde
Forma: inserto cilindrico estremamente sottile, **sinistro**, diamantatura D46



Numero d'ordine: Punta retro n. 56
Punta retro n. 56A

0.571.7322
1.006.2040

Punta SONICflex retro n. 57 / 57A

Trattamento: ricerca/localizzazione del canale radicolare, significativa semplificazione del lavoro durante la preparazione di cavità retrograde
Forma: inserto cilindrico sottile, **a destra**, diamantatura D46



Numero d'ordine: Punta retro n. 57
Punta retro n. 57A

0.571.7332
1.006.2041

Punta SONICflex retro n. 16 / 16A

Trattamento: preparazione del canale radicolare, notevole semplificazione dell'accesso in presenza di forte incurvatura della radice
Forma: **sinistro**, cilindro piccolo, diamantatura D64



Numero d'ordine: Punta retro n. 16
Punta retro n. 16A

0.571.5541
1.006.2036

Punta SONICflex retro n. 17 / 17A

Trattamento: preparazione del canale radicolare, notevole semplificazione dell'accesso in presenza di forte incurvatura della radice
Forma: **destro**, cilindro piccolo, diamantatura D64



Numero d'ordine: Punta retro n. 17
Punta retro n. 17A

0.571.5581
1.006.2035

Punta SONICflex retro n. 20 / 20A e n. 21 / 21A

Trattamento: preparazione della sezione inferiore; preparazione conforme all'asse del canale radicolare in presenza di difetto osseo minimo a pera, **piccolo**, **a sinistra**, diamantatura D64



Numero d'ordine: Punta retro n. 20
Punta retro n. 20A

0.571.5521
1.006.2037

Forma: a pera, **piccolo**, **destro**, diamantatura D64



Numero d'ordine: Punta retro n. 21
Punta retro n. 21A

0.571.5561
1.006.2038

Punta SONICflex retro n. 55 / 55A

Trattamento: per radici dall'apice ad inclinazione fortemente frontal
Forma: diamantatura D46



Numero d'ordine: Punta retro n. 55
Punta retro n. 55A

0.571.7342
1.006.2039

ENDODONZIA

Punta SONICflex endo n. 66 / 66A

Trattamento: formazione della cavità di accesso, rimozione eccedenze
Forma: estremità convessa, **grande**, diamantatura D46



Numero d'ordine: Punta endo n. 66
Punta endo n. 66A

1.000.5825
1.006.1992

Punta SONICflex endo n. 67 / 67A

Trattamento: ingrandimento canali di maggiori dimensioni
Forma: conica **125°**, diamantatura D46



Numero d'ordine: Punta endo n. 67
Punta endo n. 67A

1.000.5822
1.006.1994

Punta SONICflex endo n. 68 / 68A

Trattamento: ingrandimento canali di maggiori dimensioni
Forma: conica **112°**, diamantatura D46



Numero d'ordine: Punta endo n. 68
Punta endo n. 68A

1.000.5823
1.006.1996

Importanti informazioni sui
codici articolo:


XX: Punta per SONICflex 2003/2000 (filettatura lunga)
XXA: Punta per SONICflex 2008 (filettatura corta)

Punta SONICflex endo n. 69 / 69A

Trattamento: rimozione di residui dell'otturazione del canale radicolare
Forma: a estremità convessa, **piccolo**, diamantatura D46



Numero d'ordine: Punta endo n. 69
Punta endo n. 69A

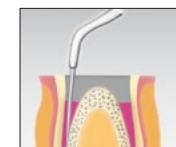


1.000.5827
1.006.1998

Punta SONICflex endo n. 70 / 70A

Tattamento: per canali particolarmente lunghi e larghi
Forma: conica **117°**, diamantatura D 25, parte anteriore non diamantata




Numero d'ordine: Punta endo n. 70
Punta endo n. 70A

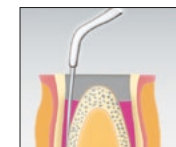

1.000.5821
1.006.2000

SONICflex endo clean n. 96 / 96A

Trattamento: per il lavaggio del canale radicolare, per rimuovere detriti e smear layer e per aumentare la soluzione di lavaggio antibatterica
Forma: angolo da 105° risp. 75°

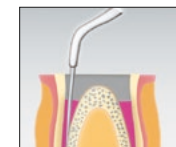

Numero d'ordine:

Supporto Endo clean n. 96

1.008.5163 | A: 1.008.5164

Aghi endo clean (6 pz ciascuno) per tutti i SONICflex:

015 bianco: 1.006.2042 | 020 giallo: 1.006.2043 | 025 rosso: 1.006.2044



Accessori:



Chiave torsionometrica

1.000.4887

Dental Excellence
in ogni area.



Attrezzatura per lo studio

Riuniti e lampade, seggiolini, sistemi di comunicazione con il paziente e altri accessori per lo studio odontoiatrico.



Strumenti

Manipoli e contrangoli, turbine, sistemi per lucidatura ad aria e piccole attrezzature per ogni applicazione, tra cui diagnostica, profilassi, conservativa, chirurgia, endodonzia e manutenzione della strumentazione.



Imaging

Radiografici intraorali, sensori e lastre ai fosfori, imaging panoramico e cefalometrico e apparecchiature CBCT specifiche per ogni indicazione in ambito odontoiatrico.

1.008.7148_it_07/24 REV3 © Copyright KaVo Dental GmbH