

IL PRODOTTO

Tethyclean è il detergente concentrato di media alcalinità, elettivo per l'impiego in lavastrumenti automatici a ultrasuoni termodisinfettore Tethys H10 e modelli derivati, per il lavaggio di ferri e strumentario medicale e odontoiatrico in preparazione dei trattamenti di disinfezione e/o sterilizzazione.

Alla diluizione d'uso e nelle condizioni normali di utilizzo in macchina lavastrumenti, Tethyclean rimuove facilmente residui organici, residui di sangue e detriti aderenti agli articoli medicali con una azione detergente efficace sullo sporco e sicura sui materiali.

Tethyclean è adatto per trattare strumentario di acciaio inossidabile, plastiche e gomme. Non utilizzare su articoli di Alluminio o leghe leggere.

Gli speciali tensioattivi riducono la tensione superficiale del liquido di lavaggio, favoriscono l'emulsione e la dispersione dei residui nel liquido prevenendo il rideposito sui materiali trattati.

Efficaci agenti antischiumogeni ne ottimizzano l'impiego anche nelle macchine lavastrumenti con lavaggio a spruzzo.

Tethyclean è Accessorio di Dispositivo Medico.



COMPONENTI



100 g di prodotto contengono: < 5 g Tensioattivi anfoteri, fosfonati, enzimi, 1,2-benzoisothiazolin-3-one, additivi, acqua. Detergente conforme al Regolamento CE 648/2004

CARATTERISTICHE

La capacità detergente di Tethyclean e la sua eccellente applicabilità al lavaggio dei dispositivi medici e odontoiatrici è stata confermata mediante test secondo i requisiti della norma tecnica EN ISO 15883-1 per processi di lavaggio in termodisinfettore a ultrasuoni Tethys H10. Articoli clinici e altri oggetti standard sono stati artificialmente contaminati secondo ISO TS 15883-5 e sottoposti ad un ciclo di lavaggio a ultrasuoni (6 minuti, 45 °C) con detergente Tethyclean in diluizione 7,5 mL/L (45 mL di detergente in 6 L di acqua).

I test hanno confermato

- efficacia detergente:
assenza di residui visibili sui materiali artificialmente contaminati;
assenza di proteine rilevabili nei materiali trattati;
- alta risciacquabilità e sicurezza clinica (dopo 2 soli risciacqui):
assenza di tensioattivi residui in concentrazioni rilevabili sui materiali trattati
assenza di residui con effetti citotossici sui materiali trattati.

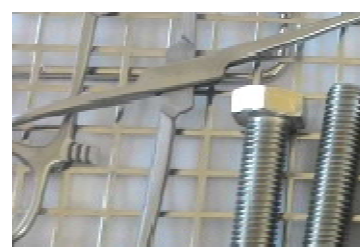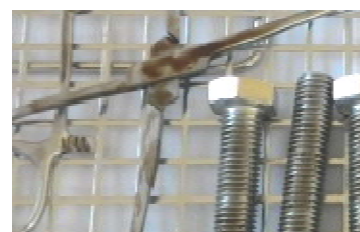

USO

IL PRODOTTO È PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Uso: diluito in acqua (5 – 10 mL/L) e secondo le indicazioni d'uso dei termodisinfettori compatibili, in cicli di lavaggio da 6 a 20 minuti a temperature comprese fra 40 e 55 °C. A fine lavaggio effettuare almeno due risciacqui.

Nel termodisinfettore a ultrasuoni Tethys 10, il detergente Tethyclean è dosato automaticamente dalla macchina in diluizione di 7 mL/L, corrispondente a 45 mL di detergente in 6 Litri di acqua nella vasca lavastrumenti, e impiegato nel ciclo standard di lavaggio a ultrasuoni a 45 °C per 6 minuti.

Non miscelare con altri prodotti.

Non utilizzare per lavaggi manuali o per lavaggio di superfici.

Non utilizzare per il lavaggio di articoli di Alluminio o di leghe leggere.

Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non si presenti integro.

VALIDITA': 2 ANNI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del Regolamento CE 1272/2008

Tuttavia in linea precauzionale si consiglia di adottare le seguenti misure di prudenza:

P262 Evitare il contatto con gli occhi

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Come norma generale di igiene e sicurezza: Osservare le normali precauzioni per la manipolazione di prodotti chimici. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. Indossare indumenti adeguati al lavoro. Lavare le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici, prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo. Provvedere buona aerazione e ricambio d'aria

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto entro il contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco e ventilato, a temperature comprese fra 10 e 40 °C, lontano fonti di ignizione e di calore.

In caso di perdite o rotture del contenitore raccogliere con materiale assorbente e risciacquare con acqua.

SMALTIMENTO

Smaltire il liquido come rifiuto pericoloso.

Evitare sversamenti del prodotto in fognatura, sul suolo, le acque superficiali o sotterranee.

Il contenitore è di Polietilene: risciacquato di eventuali residui, può essere indirizzato alla raccolta differenziata dei materiali plastici, al riciclo, all'incenerimento, al conferimento in discarica.

NOTE

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla SCHEDA DATI DI SICUREZZA.

Le informazioni contenute nella presente scheda sono date in buona fede ed alla luce delle nostre attuali conoscenze, e non esimono l'utilizzatore del prodotto dal conservarlo, maneggiarlo ed utilizzarlo secondo quanto sopra indicato e sulla base delle norme di igiene e di buona pratica.

Non si assumono responsabilità per ogni uso improprio del prodotto.

- fine scheda -