


From front...



to back...

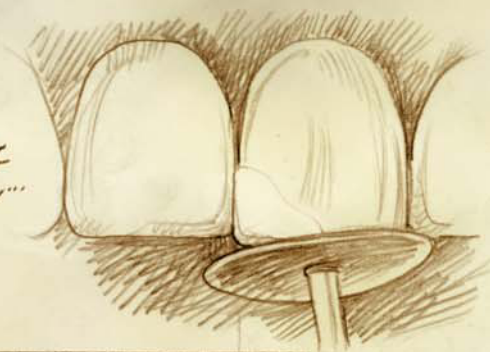

*to everywhere
in between.*



Sistema di rifinitura Sof-Lex™



L'introduzione del sistema di rifinitura e lucidatura Sof-Lex™, nella metà degli anni '70, ha rappresentato un'innovazione rivoluzionaria.

Grazie al sistema di codifica cromatica per l'identificazione delle diverse grane dei dischetti e delle strisce, e grazie al facile utilizzo dei mandrini, il sistema Sof-Lex™ continua a fornire risultati eccellenti.

La rivoluzione continua con l'introduzione degli...



Spazzolini Sof-Lex™

La spazzola per rifinitura Sof-Lex combina le due procedure separate di rifinitura e lucidatura dei restauri in composito su posteriori, in un unico passaggio. Il fatto di non doversi fermare vi fa risparmiare tempo e fatica, rendendo la procedura del restauro molto più efficace.



Le setole morbide in elastomero si conformano perfettamente al dente durante il passaggio sulle superfici concave e convesse, rendendo la superficie particolarmente liscia. Le setole della spazzola contengono un abrasivo in ossido di alluminio, il quale impartisce una lucidatura finale simile a quella ottenuta con altri strumenti di finitura, ma in un minor tempo.

Gli spazzolini Sof-Lex sono autoclavabili e quindi riutilizzabili. Completano il sistema Sof-Lex 3M ESPE di rifinitura e lucidatura, con il quale si possono ottenere risultati eccellenti risparmiando tempo e fatica.

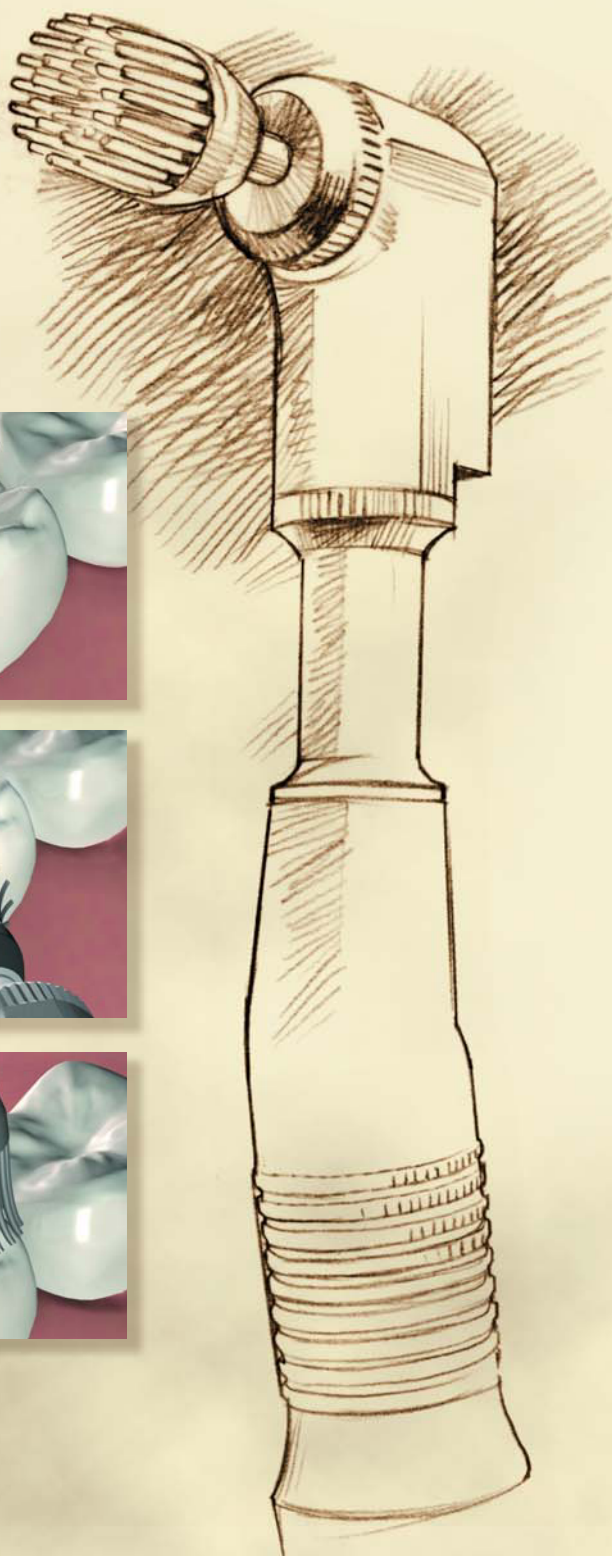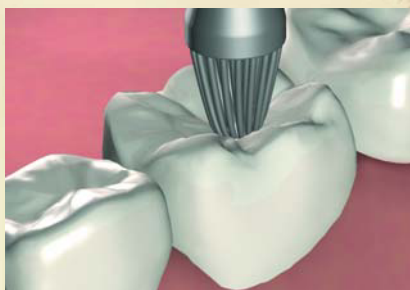


Dischetti e strisce Sof-Lex™

Risultati eccellenti in modo semplice e veloce

La codifica cromatica, facilitando l'identificazione delle grane, da quella grossa a quella superfine, permette di seguire correttamente gli step di lucidatura.

Con il sistema Pop-On/Off la sostituzione dei dischetti diventa più veloce. Le strisce e i dischetti forniscono risultati eccellenti con un elevato risparmio di tempo.

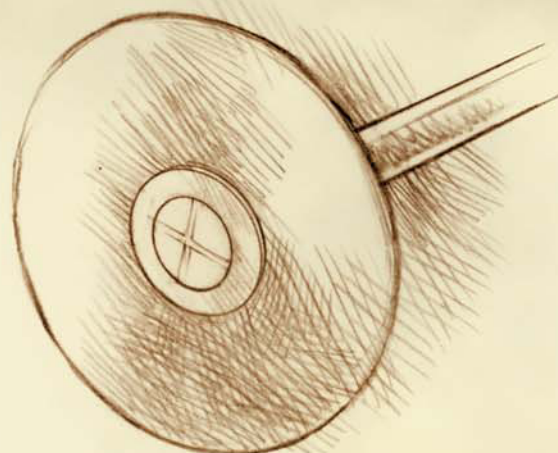

Dischetti Sof-Lex

- *Dischetti utilizzabili su entrambi i lati*
Facilita l'allineamento del dischetto per la lucidatura di superfici orientate in modo diverso.
- *Facile e veloce sostituzione dei dischetti*
Con il sistema Pop-On/Off i dischetti si installano e tolgono facilmente dal mandrino, senza difficili operazioni di allineamento.
- *Codifica cromatica*
Sequenza cromatica dai colori scuri (grana grossa) a quelli chiari (grana superfine) per seguire facilmente gli step di lucidatura.
- *Due dimensioni*
Per diverse esigenze.
12,7 mm o 9,5 mm
- *Massimizzazione della superficie abrasiva*
Mandrino a punta piatta. Dischetto con apertura piccola ed arrotondata.
- *Due tipi di spessore*
Normale o extrafine per impiego diversificato



Sof-Lex™ Dischetti



Sof-Lex™ Dischetti Extra sottili



Strisce Sof-Lex

Le strisce Sof-Lex, per rifinire e lucidare le zone interprossimali, completano il sistema Pop-On/Off.

- *Inserimento semplice*
La parte centrale della striscia, priva di grana, garantisce che l'inserimento interprossimale non crei problemi e non levighi i punti di contatto.
- *Due tipi di grana per striscia*
Permettono di gestire il lavoro in modo razionale
- *Codifica cromatica*
Sequenza cromatica dai colori chiari a quelli scuri per seguire facilmente gli step di lucidatura.
- *Tipi di grana e di larghezza disponibili*
Sono disponibili quattro tipi di grana e due tipi di larghezza
- *Resistente allo strappo*
Lo strato centrale in poliestere garantisce alle strisce la necessaria resistenza allo strappo; sono comunque flessibili e non danneggiano le gengive.

Sof-Lex™ Strisce



Sof - Lex sistema di rifinitura e lucidatura


Ø 9,5 mm

1981C
1981M
1981F
1981SF



Ø 12,5 mm

1982C
1982M
1982F
1982SF

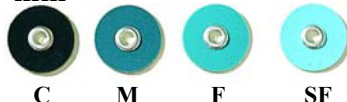

Sof – Lex Extra Sottile


Ø 9,5 mm

2381C
2381M
2381F
2381SF




Ø 12,5 mm

2382C
2382M
2382F
2382SF

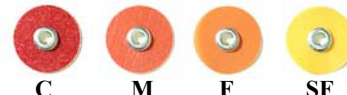

Sof-Lex™ Strisce

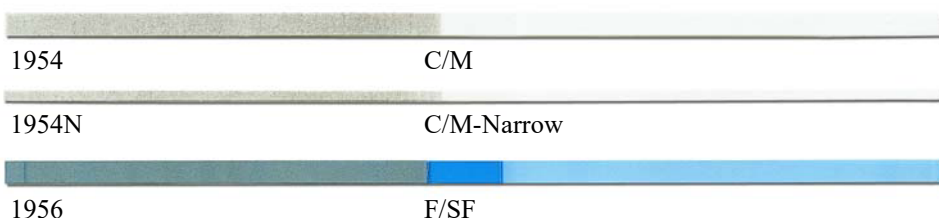

Sof-Lex™ Ricambi

1750 Kit introduttivo

- 12 spazzolini Sof-Lex con 2 mandrini
- 30 dischetti assortiti Extra Sottili 12,5 mm e 1 mandrino per dischetti



1751

- 24 spazzolini di ricambio



Mandrini di ricambio

- 1755 – Right Angle**
- 3 mandrini di ricambio
- 1756 – Friction Grip**
- 3 mandrini di ricambio

Prodotti Dentali

3M Italia SpA

Via San Bovio, 3 - 20090 Segrate (MI)

Tel. 02 7035 2419 - Fax 02 7035 2061

www.3mespe.com e-mail: 3mespeitaly@mmm.com