


Sani-Tip®

Il sistema brevettato di puntali monouso per siringa aria-acqua

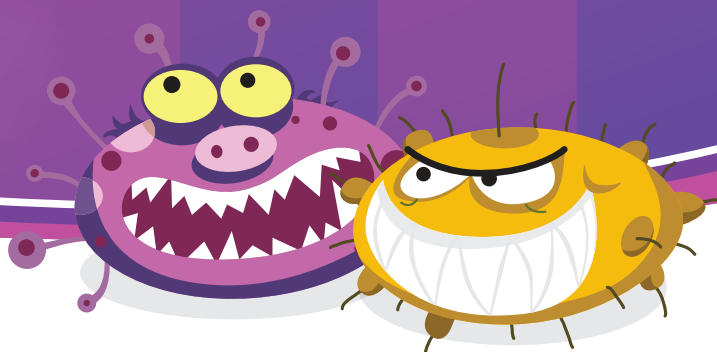

La vostra arma contro le contaminazioni crociate!

- Protezione assoluta dei pazienti garantita dal pratico sistema monouso
- Praticità d'utilizzo assicurata da una facile rimozione del puntale
- Elevato standard qualitativo grazie alla perfetta separazione dei canali aria-acqua
- Maggiore visibilità del campo operatorio grazie al puntale trasparente piegato a 140°

For better dentistry

DENTSPLY
ITALIA

**Tra una visita e l'altra, cambiate i guanti,
gli aghi, gli strumenti...
e la vostra siringa aria-acqua?**


La siringa aria-acqua: un costante rischio di trasmissione delle infezioni crociate

- 1** Nella bocca del paziente la siringa si contamina:
"All'esterno come all'interno"
 - Contatto diretto con il sangue e la saliva
 - Fenomeno d'aspirazione dei fluidi quando la pressione cessa ("effetto risucchio")
- 2** Il lavaggio interno del puntale non è possibile:
"I canali molto sottili rendono il lavaggio illusorio"
 - Smontaggio impossibile
 - Contaminazione e corrosione interna inevitabili
 - Accumulo di residui e biofilm nel puntale autoclavabile
- 3** La sterilizzazione è impossibile:
"Si sterilizza solo quello che è già pulito!"
 - Se il puntale non può essere lavato internamente, allora non si può neanche sterilizzare



**...quindi cambiate anche
il puntale della vostra
siringa aria-acqua!**

Uno studio condotto sui puntali e sulle siringhe autoclavabili mostra l'ossidazione e la corrosione interna, nonché l'accumulo di residui e biofilm nel puntale autoclavabile. (The air/water syringe "P. Barton BDS FDSRCS and M.V. Martin BDS BA PhD FRC Path - Department of Clinical Dental Sciences - University of Liverpool")

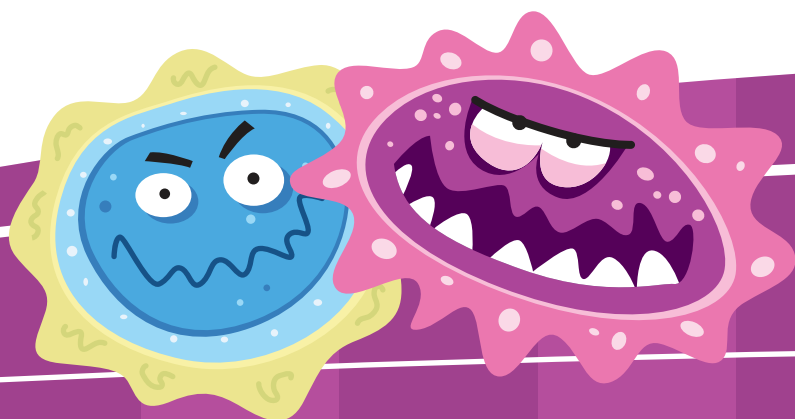

Sani-Tip®:

il vostro puntale monouso per la siringa aria-acqua contro le contaminazioni crociate!

1

Efficacia comprovata

Essendo monouso, Sani-Tip® garantisce la protezione assoluta dei pazienti contro il rischio delle infezioni crociate.

L'utilizzo delle guaine Sani-Shield® assicura una protezione adeguata del corpo della siringa dal contatto con le sorgenti di contaminazione.

2

Qualità elevata

Il puntale Sani-Tip® presenta un design brevettato, assolutamente innovativo, caratterizzato da un canale centrale per l'acqua e sei distinti canali per l'aria disposti a corona, che assicurano la totale separazione dell'acqua dall'aria.

In tal modo, l'acqua viene nebulizzata mentre l'aria esce perfettamente secca, in modo da non interferire con le vostre procedure operative.

3

Praticità d'uso


Il puntale di plastica trasparente è piegato a 140° e può essere ruotato di 360° per consentire una maggiore visibilità del campo operatorio. La rapida installazione ed il ricambio dei puntali assicurano una praticità d'utilizzo ed un comfort di lavoro superiore a qualsiasi altro sistema monouso per siringhe aria-acqua.

Sani-Tip® offre una vasta scelta di adattatori per tutti i principali tipi di siringhe.

Gli adattatori sono autoclavabili a 134°C.

Vengono realizzati in ottone inossidabile e senza alluminio eliminando così il rischio di corrosione in presenza di acqua e assicurandone un facile smontaggio.

Sistema brevettato Sani-Tip®

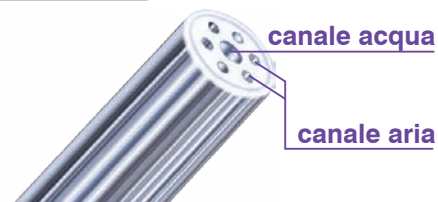


bordo adattatore

canale aria

canale acqua

mandrino acqua

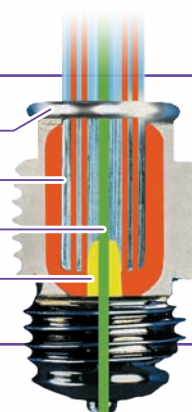

sostituzione rapida



Perché scegliere Sani-Tip®?

Controllo eccellente delle infezioni crociate


- Puntale monouso
- Per ogni puntale monouso viene fornita gratuitamente una guaina Sani-Shields® per garantire una barriera protettiva su tutta la siringa

Aria secca garantita

- Sistema brevettato: aria secca garantita dalla separazione dei canali aria e acqua, sia nel puntale che nell'adattatore

Pratico


- Puntale di plastica trasparente piegato a 140° per una maggiore visibilità; orientabile a 360°
- Rapida installazione e sostituzione
- Riduzione dell'esposizione della siringa all'azione corrosiva dei disinfettanti o della sterilizzazione
- Adattatori compatibili con tutti i principali tipi di siringhe presenti sul mercato

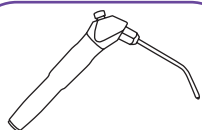


A-1 122220N S1
ADEC Style Syringes




C-1 122370N S1
CASTELLINI Cleanthree
and Cleanwarm Syringes

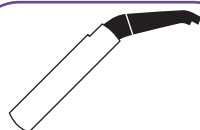


C-2 122371N S1
CASTELLINI Multisteril
Syringes

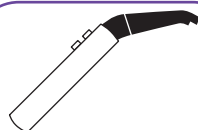


C-3 122372N S1
CASTELLINI Multisteril II
(Puma Unit) Syringes

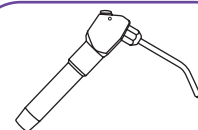


E-1 122230N S1
ENGLE/MARCO Syringes

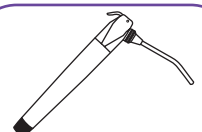

F-1 122260N S1
FARO Syringes Pre-1991

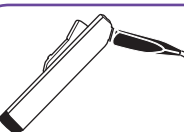

F-2 122262N S1
FARO Electronique
Syringes

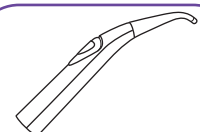

F-3 122263N S1
FARO SR903 / SR906
Syringes




K-3 122275N S1
KAVO 573 0620 / 573 0630
Syringes (Systematica no optics)




K-4 122276N S1
KAVO 773 0500 / 773 0510
Estetica Syringes



L-2 122325N S1
LUZZANI Minimatic
Syringes (Black Plastic)

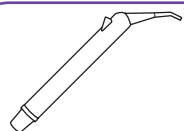


L-3 122326N S1
LUZZANI Minilight, Minimatic,
Minimate Anthos A4 Syringes

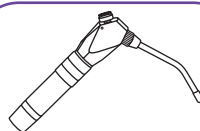


MC-1 122340N S1
MICRON / NSK Syringes




M-1 122330N S1
MORITA WS9 Syringes
(silver)

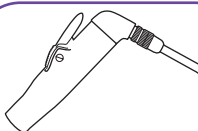


M-1 122330N S1
MORITA WS10 Syringes
(reddish brown)

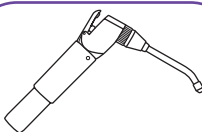


M-2 122336N S1
MORITA WS66 / WS88 /
WS89 / WS90 Syringes

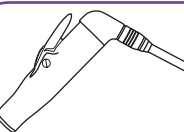


M-3 122331N S1
MORITA WS11 Syringes
(grey plastic body)

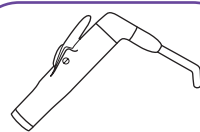

M-4 122332N S1
MORITA WS12 Syringes (dark
brown autodisable plastic body)

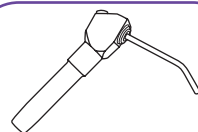


P-1 122280N S1
PRESS RING DCI Syringes

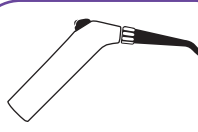

S-1 122250N S1
SIEMENS Sprayvit 4000 /
4000L / 4000E Syringes



SL-2 122251N S1
SIEMENS Sirona Syringes

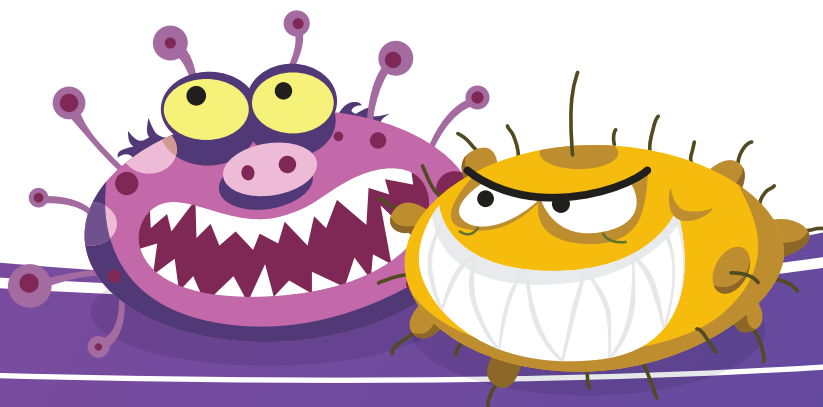



Sani-Tip®: confezioni da 250 puntali

**Guaine
Sani-Shield®
Gratuite in ogni
confezione
Sani-Tip®**




Sani-Tip® puntali Standard 76mm



Sani-Tip® - puntali Mini 57mm

Guaine Sani-Shield®:
gratuite in ogni confezione Sani-Tip®.
Protezione per la siringa aria-acqua.
Confezione da 250 guaine (22,5 x 3,5 cm)

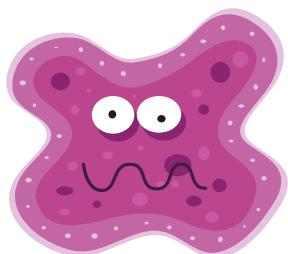

Siringa aria-acqua con puntale Sani-Tip®
e guaina Sani-Shield®




Gli adattatori più richiesti:

**LUZZANI Minimatic
L-2 122325N S1**




**LUZZANI Minilight
L-3 122326N S1**

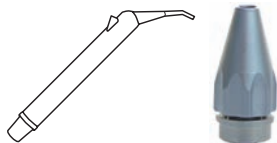

**CASTELLINI
C-1 122370N S1**



**CASTELLINI Multisteril II
C-3 122372N S1**

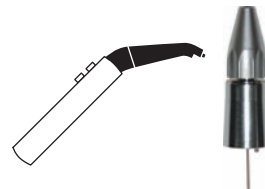

**SIEMENS Sprayvit
S-1 122250N S1**



**SIEMENS Sirona Syringes
SL-2 122251N S1**




**KAVO
K-4 122276N S1**



**ADEC
A-1 122220N S1**



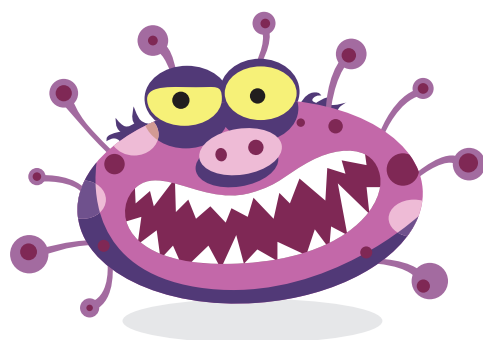

Dentsply Italia S.r.l.
Via Curtatone, 3
00185 Roma
www.dentsply.it

Numero Verde
800 921 107

internalsales@dentsply-it.com

For better dentistry

DENTSPLY
ITALIA