

Your practice is *our* inspiration.™

Maxcem Elite | La semplicità perfezionata.





Il cemento resinoso automordenzante e autoadesivo Maxcem Elite, indicato per la cementazione di tutti i restauri indiretti, rappresenta la perfezione della semplicità.

Grazie alla maggiore forza di adesione e alla superiore semplicità d'uso, offre una comprovata tecnologia di adesione senza sacrificare le prestazioni.

Semplice rimozione degli eccessi, nessuna miscelazione manuale e nessuna refrigerazione richiesta per lo stoccaggio. I beccucci intraorali e quelli intracanalari assicurano una maggiore praticità di applicazione consentendo di estrarre il materiale direttamente in tutte le zone difficili da raggiungere.

Motivazioni cliniche:

L'applicazione dell'adesivo è sensibile alla tecnica d'uso, una sfida quotidiana da vincere per i dentisti. Maxcem Elite elimina questo passaggio per fornire le migliori prestazioni di sempre, la massima praticità e la massima sicurezza d'impiego.

Ricerca

Maxcem Elite impiega lo stesso ed esclusivo adesivo impiegato da tutta la famiglia di adesivi OptiBond di Kerr. La matrice resinosa ottimizzata ed il sistema di riempitivi migliorano le capacità umettanti, offrono un'eccezionale adesione, consentono una fotopolimerizzazione immediata del materiale ed una migliore stabilità dello stesso durante la conservazione.

Le proprietà tissotropiche di Maxcem Elite facilitano il posizionamento del materiale ed una semplice rimozione degli eccessi. Un sistema proprietario redox di polimerizzazione elimina i problemi di decolorazione inerenti ai sistemi di polimerizzazione basati su BPO* ammine terziarie ed assicura una migliore estetica dei restauri.

* Perossido di benzoile.

Caratteristiche


Forza di adesione compresa tra 22-36 MPa. Elevata forza di adesione senza l'impiego di alcun adesivo.

Semplicità d'uso. Non necessita di refrigerazione, nessuna miscelazione manuale richiesta e semplice rimozione degli eccessi.

Compatibilità con tutti i substrati. Restauri anteriori o posteriori in ceramica, metallo, porcellana fusa a metallo e materiali CAD/CAM.


Efficace meccanismo di autopolimerizzazione. Il materiale si polimerizza completamente anche in assenza di luce.

Resistenza al taglio (MPa) su dentina a 24 ore

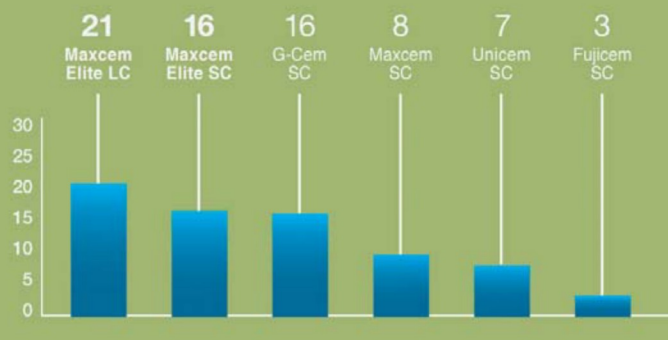

Test di 24 ore. Dati forniti dal Dr. Carlos Muñoz, SUNY (Buffalo). Disponibili su richiesta.

Resistenza al taglio (Mpa) del Maxcem Elite su diversi substrati autopolimerizzato

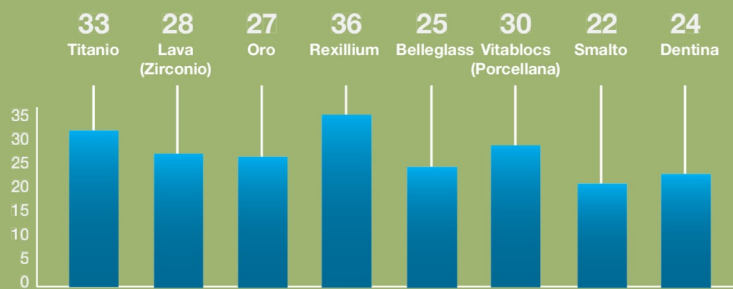

Test di 24 ore. Dati interni. Disponibili su richiesta.

Confezionamenti

34055 - Maxcem Elite Standard Kit

Contenuto: 5 siringhe da 5 g (2 del colore chiaro, 1 bianco, 1 bianco opaco, 1 giallo), 30 puntali automiscelanti standard, 20 puntali automiscelanti con attacco per beccucci intraorali e intracanalari, 10 beccucci intraorali, 10 beccucci intracanalari, guida tecnica all'utilizzo.

34056 - Maxcem Elite Value Kit

Contenuto: 2 siringhe da 5 g colore chiaro, 1 siringa automiscelante da 11,7 g di Temp Bond NE, 10 puntali auto miscelanti standard, 10 puntali automiscelanti con attacco per beccucci intraorali e intracanalari, 10 beccucci intraorali, 10 beccucci automiscelanti per TempBond, guida tecnica all'utilizzo.

34057 - Maxcem Elite Mini Kit

Contenuto: 1 siringa da 5 g colore Chiaro, 5 puntali automiscelanti standard, 5 puntali automiscelanti con attacco per beccucci intraorali e intracanalari, 5 beccucci intraorali, guida tecnica all'utilizzo.

Ricambi nella tonalità a scelta

Contenuto : 2 siringhe da 5g cad., 10 puntali automiscelanti standard, 10 puntali automiscelanti con attacco per beccucci intraorali e intracanalari, guida tecnica all'utilizzo.

34058 - Chiaro

34059 - Bianco

34060 - Bianco Opaco

34061 - Giallo

34062 - Marrone

Accessori

34074 - 50 Ricambi puntali automiscelanti standard Maxcem Elite

34075 - 10 Ricambi puntali automiscelanti con attacco per beccucci intraorali e intracanalari e 10 beccucci intraorali

34076 - 10 Ricambi puntali automiscelanti con attacco per beccucci intraorali e intracanalari Maxcem Elite, 10 beccucci intracanalari