

3M Science.
Applied to Life.™



3M™ Impregum™
Materiale da impronta in polietere

**Ogni sfida diventa
un caso semplice.**

La via più rapida alla pre del polietere per i casi m 3M™ Impregum™ Supe

Impregum, il materiale da impronta in polietere, è da sempre la soluzione comprovata per situazioni complesse e impianti. Non sarebbe fantastico poter avere la stessa eccezionale precisione e riproduzione del dettaglio anche per impronte di un solo elemento?

Abbiamo quindi sviluppato il nuovo materiale “super quick” in polietere, Impregum Super Quick, per garantirvi tutti i requisiti del polietere senza limitare la produttività.

Grazie alla sua formulazione nuova ed esclusiva, Impregum Super Quick unisce le eccezionali prestazioni e affidabilità di un polietere alla velocità di un VPS. Le aree subgengivali e l'ambiente umido non saranno più un problema.



Indurimento più rapido.

Così veloce, così perfetto. Con un tempo di indurimento intraorale di soli 2 minuti, il nuovo Impregum Super Quick permette impronte più rapide nei casi meno estesi, come corone singole, impianti, inlay/onlay e piccoli ponti fino a 3 elementi.

Formulato per il successo.

Un vero polietere con una formula innovativa che assicura una reazione di indurimento super rapida e un aroma migliore.

Fate sentire i vostri pazienti a loro agio.

L'aroma di menta, ora ancora più fresco, insieme al tempo ridotto di permanenza in bocca, migliorano significativamente il comfort dei vostri pazienti.

Il polietere incontra la procedura CAD/CAM.

Impregum Super Quick può essere sottoposto a scansione con l'attuale generazione di scanner, per una collaborazione più efficiente con il vostro laboratorio.

cisione eno estesi. r Quick.

“ *Un materiale da impronta in polietere estremamente preciso, a indurimento più rapido e con un aroma migliore.* ”


Stephen J. Gordon, DDS
Dentistry at Millennium Park · Chicago (IL), U.S.A.



Applicazione di 3M™ Impregum™ Super Quick Light Body utilizzando la siringa intraorale 3M™ viola.



Colori contrastanti per un'eccellente leggibilità.

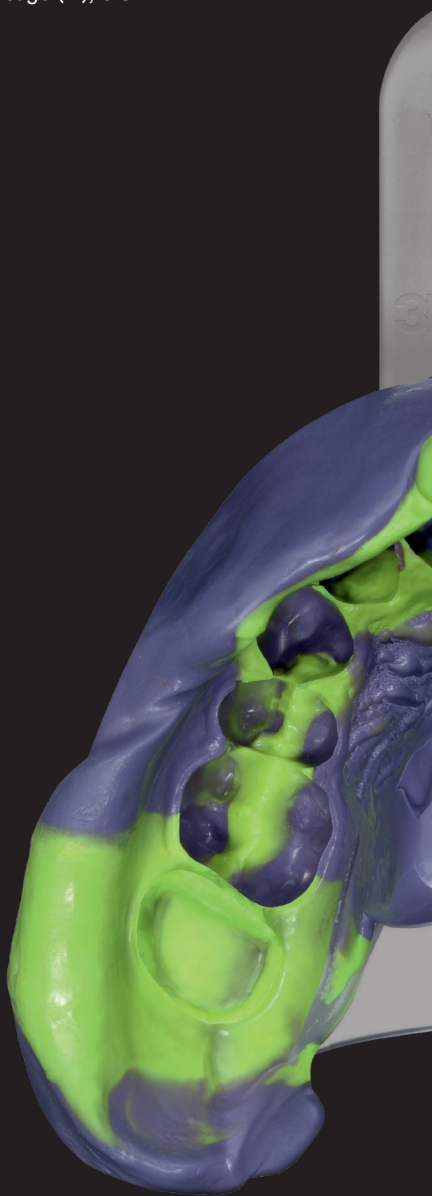



Da oggi anche nella viscosità

Heavy Body!

Ideale per la tecnica
1 step double mix


3M™ Impregum™ Super Quick

- Primo polietere super rapido con tempo di lavorazione di 45 secondi e indurimento rapido di 2 minuti.
- Disponibile nelle consistenze medium e light body.
- Per tecniche di impronta monofase e 1-step double mix.
- Perfetto per impronte di corone singole, impianti, inlay/onlay e piccoli ponti fino a 3 unità.

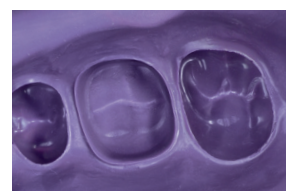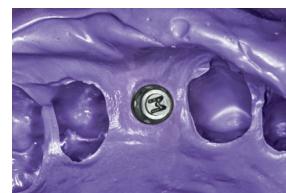


3M™ Impregum™ Materiale

Comprovati vantaggi per una precisione di cui pote

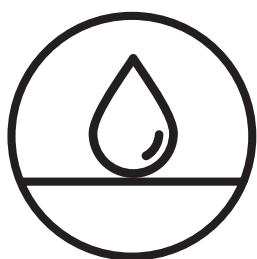


Ambiente umido? Nessun problema!

Grazie alla sua superiore tolleranza all'umidità, il polietere Impregum entra in contatto con i tessuti dentali in modo ottimale, portando a un'eccellente riproduzione del dettaglio, senza vuoti. Questo è un vantaggio soprattutto nei casi sottogengivali.

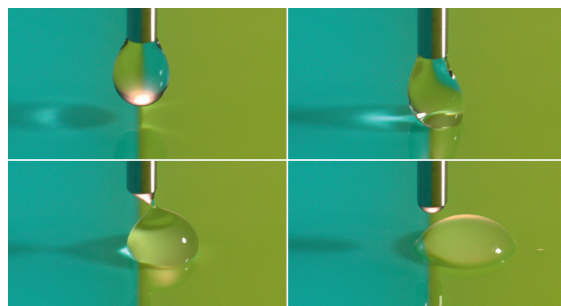

La superficie di 3M™ Impregum™ è intrinsecamente idrofila, così entra in contatto immediato con i denti umidi e il tessuto. Questo test lo dimostra: la goccia di acqua viene attratta da 3M™ Impregum™ Super Quick, il materiale con l'idrofilia più alta (destra) e si muove immediatamente verso tale materiale.

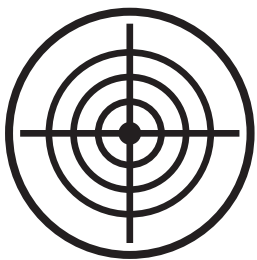

Precisione senza confronti.

L'eccellente fluidità di Impregum permette di acquisire i dettagli più fini: fluisce in modo omogeneo, anche nei punti più difficili, realizzando impronte prive di vuoti e dalla massima precisione.




3M™ Impregum™ fluisce in modo omogeneo intorno ai denti e sui tessuti gengivali per acquisire ogni dettaglio importante.



Prendete tutto il tempo che vi serve.


A differenza dei materiali VPS, Impregum mostra una fluidità costantemente superiore. È possibile utilizzare tutto il tempo di lavorazione indicato con la massima affidabilità – le imprecisioni associate con l'indurimento prematuro sono annullate. Una volta terminato il tempo di lavorazione, l'indurimento inizia immediatamente. Questo garantisce una miglior riproduzione dei dettagli e meno distorsioni.

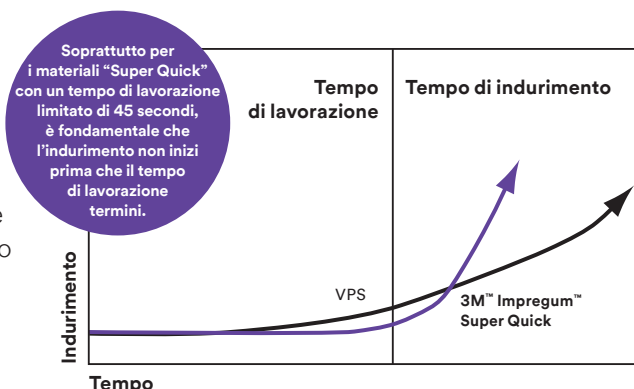

Al contrario dei materiali VPS, il polietere mostra una fluidità costante per tutto il tempo di lavorazione, a cui segue un indurimento immediato. (illustrazione schematica)

da impronta in polietere.

ersi fidare.

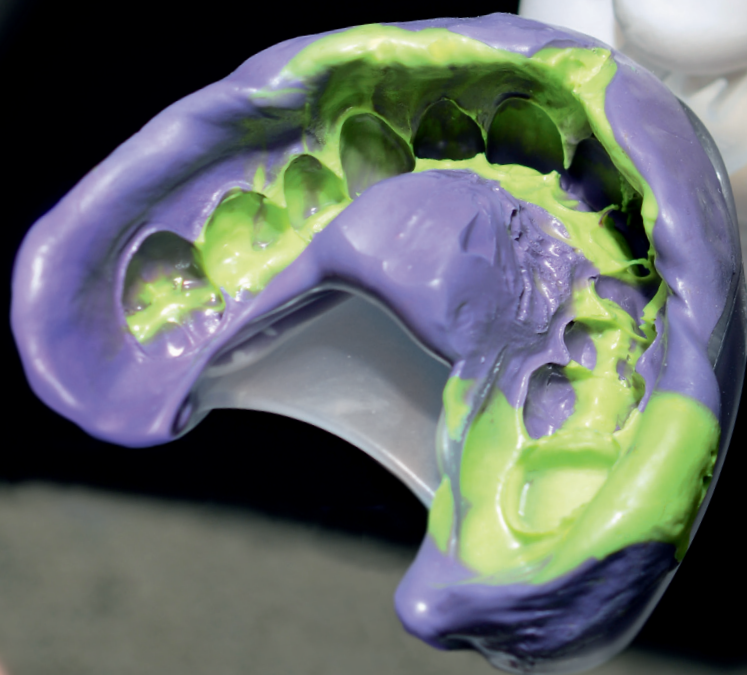

Sicurezza

Un brand a cui
dentista,
odontotecnico
e paziente
possono affidarsi.

- **Risparmio di tempo e di denaro** grazie alle impronte eccezionalmente precise fin da subito.
- **Maggior efficienza per voi e per il laboratorio**, riducendo i rifacimenti e le modifiche.
- Assicura **maggior comfort per il paziente**.

ALTAMENTE SODDISFATTI

Una valutazione clinica mostra una **percentuale di soddisfazione molto elevata**, pari quasi al **95%** per quanto riguarda l'**accuratezza** delle impronte realizzate con 3M™ Impregum™ Super Quick e la **precisione dei restauri finali**.



Fonte: valutazione clinica di 3M con 447 partecipanti da Europa e USA, 2017.

Per impronte più **predici precise e pratiche.**

Sempre la scelta corretta, indipendentemente dall'indicazione e dalla tecnica preferita.

NEW

Indicazioni	Tecnica d'impronta	Corona singola	Impianto (≤ 2 unità)	Inlay/onlay (≤ 2 unità)	Ponte (≤ 3 unità)	Faccette	Ponti (>3 unità)	Impianti (>3 unità)	Impronta pick-up	Impronta funzionale
Materiali a indurimento super rapido										
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (MB)	Monofase	😊	😊	😊	😊	😊				
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (HB)	1-step double mix	✓	✓	✓	✓	✓				
3M™ Impregum™ Super Quick (LB)										
Materiali a indurimento rapido										
3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick (MB)	Monofase									
3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick (HB)	1-step double mix	✓	✓	✓	✓	✓				
3M™ Impregum™ L DuoSoft™ Quick (LB)										
Materiali a indurimento regular										
3M™ Impregum™ Penta™ Soft (MB)	Monofase									
3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ (HB)	1-step double mix					✓	😊	✓	✓	✓
3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ (LB)										
3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ (LB)										
3M™ Impregum™ Penta™ (MB)	Monofase					✓	✓	😊	😊	✓



Le raccomandazioni sono suggerimenti generali e si riferiscono alle principali indicazioni. I prodotti 3M possono essere utilizzati per più indicazioni.

bili,

Tutto ciò che vi serve per semplificare la procedura dell'impronta.



Retrazione

3M™ Astringent Retraction Paste

Il modo più rapido e delicato per retrarre il tessuto gengivale e controllare il sanguinamento.



Miscelazione e applicazione

3M™ siringhe intraorali viola

Pratica applicazione del materiale wash con estrema precisione e meno sprechi.

3M™ Pentamix™ 3 Automatic Mixing Unit

Miscelazione priva di vuoti dei materiali d'impronta ad alta velocità.



Impronta

3M™ Impregum™ Materiale da impronta in polietere

Precisione senza rivali per restauri dall'adattamento perfetto, con minori ripetizioni e rifacimenti.

Nuovo Impregum™ Super Quick

Indurimento intraorale super rapido in 2 minuti per un'assoluta precisione nei casi meno estesi.

2
min
Polietere

3M™ Impression Tray

Portaimpronta ad arcata completa, facile da personalizzare, con flangia autoritensiva e senza necessità di adesivo.



	Sistema di erogazione	Viscosità bassa alta	Tecnica d'impronta	Tempo di lavorazione max. raccomandato (min:sec)	Tempo di indurimento intraorale a 37°C (min:sec)
Materiali a indurimento super rapido					
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick			Monofase o 1-step double mix	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Super Quick Heavy Body			1-step double mix	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Super Quick LB			1-step double mix	0:45	2:00
Materiali a indurimento rapido					
3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick			1-step double mix	1:00	3:00
3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick			Monofase	1:00	3:00
3M™ Impregum™ L DuoSoft™ Quick			1-step double mix	1:00	3:00
Materiali a indurimento regular*					
3M™ Impregum™ Penta™ Soft			Monofase	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Penta™			Monofase	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™			1-step double mix	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™			1-step double mix	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™			1-step double mix	1:45	4:15

*Tempo di indurimento dall'inizio della miscelazione 6:00 min.

Informazioni per l'ordine

Cod.	Informazioni prodotto
Kit Introduttivi per 3M™ Pentamix™ 3 Automatic Mixing Unit	
NEW 69383	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body 1 pasta base MB - 300 ml, 1 catalizzatore MB - 60 ml, 1 3M™ Penta™ Cartridge MB, 10 3M™ Penta™ Mixing Tips - Rosso, 1 3M™ Penta™ Siringa per elastomeri, 1 Adesivo per polietere - 17 ml, 3 capsule 3M™ Astringent Retraction Paste
NEW 69381	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body 1 pasta base MB - 300 ml, 1 catalizzatore MB - 60 ml, 2 cartucce LB - 50 ml cad., 1 3M™ Penta™ Cartridge MB, 10 3M™ Penta™ Mixing Tips - Rosso, 5 3M™ Intra-oral Syringes Purple, 5 3M™ Garant™ Mixing Tips viola, 5 3M™ Garant™ Intra-oral Tips bianco, 1 Adesivo per polietere - 17 ml, 3 capsule 3M™ Astringent Retraction Paste, 6 3M™ Impression Trays
NEW 69413	Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body / Light Body 1 pasta base HB - 300 ml, 1 catalizzatore HB - 60 ml, 2 cartucce LB - 50 ml cad., 1 3M™ cartuccia Penta HB, 10 3M™ Penta™ Mixing Tips - Rosso, 5 3M™ siringhe intraorali viola, 5 3M™ Garant™ Mixing Tips viola, 5 3M™ Garant™ puntali intraorali bianchi, 1 Adesivo per polietere - 17 ml, 3 capsule 3M™ Astringent Retraction Paste, 6 3M™ Impression Trays
P31734	Impregum™ Penta™ Soft 1 pasta base - 300 ml, 1 catalizzatore - 60 ml, 1 cartuccia Impregum™ Penta™ Soft, 10 puntali di miscelazione rossi Penta™, 1 siringa per elastomeri Penta™, 1 flacone di adesivo per polietere - 17 ml
P31684	Impregum™ Penta™ 1 pasta base da 300 ml, 1 catalizzatore da 60 ml, 1 cartuccia Impregum™ Penta™, 10 cannule miscelatrici Penta™, 1 siringa per elastomeri Penta™, 1 Adesivo per polietere - 17 ml
P31770	Impregum™ Penta™ Soft Quick 1 pasta base 300 ml, 1 catalizzatore - 60 ml, 1 3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick Cartridge, 10 3M™ Penta™ Mixing Tips - rosso, 1 3M™ Penta™ Elastomer Syringe, 1 Adesivo per polietere - 17 ml
P31738	Impregum™ Penta™ H DuoSoft 1 pasta base da 300 ml, 1 catalizzatore da 60 ml, 1 cartuccia P3, 10 puntali miscelatori PentaTM, 2 cartucce Garant 2 da 50 ml, 1 Garant Dispenser 1:1/2:1, 10 puntali miscelatori bianchi Garant, 10 terminali int.
P31772	Impregum Penta H/L DuoSoft Quick 1 pasta base 300 ml, 1 catalizzatore 60 ml, 10 puntali miscelatori Penta rossi, 1 cartuccia Impregum Penta H DuoSoft Quick, 2 cartucce Impregum L DuoSoft Quick da 50 ml, 10 puntali miscelatori Garant bianchi, 10 terminali intraorali Garant bianchi, 1 flacone adesivo per polietere - 17 ml
Ricambi: 2 pasta base - 300 ml ciascuno, 2 catalizzatore - 60 ml ciascuno	
NEW 69385	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Refill
NEW 69406	3M Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body Refill 2 pasta base HB - 300 ml cad., 2 catalizzatore HB - 60 ml cad.
31644	3M™ Impregum™ Penta™ Refill
31730	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Refill
31764	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick Refill
31740	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft Refill

Cod.	Informazioni prodotto
31768	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft Quick Refill
31745	3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft Refill
Ricambi	
NEW 69379	3M™ Impregum™ Super Quick Light Body 4 cartucce - 50 ml cad, 5 3M™ Intra-oral Syringes Purple, 5 3M™ Garant™ Mixing Tips viola
31751	3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ Refill 4 cartucce - 50 ml cad, 5 3M™ Intra-oral Syringes Purple, 10 3M™ Garant™ Mixing Tips bianco
31766	3M™ Impregum™ L DuoSoft™ Quick Refill 4 cartucce - 50 ml cad, 5 3M™ Intra-oral Syringes Purple, 10 3M™ Garant™ Mixing Tips bianco
Unità di miscelazione automatica 3M™ Pentamix™ Automatic	
77871	3M™ Pentamix™ 3 Automatic Mixing Unit
77903	3M™ Lite Automatic Mixing Unit - 230 V 50 Hz INT incl. 1 cartuccia 3M™ Penta™ Cartridge
77906	3M™ Pentamix™ Mixing Unit - 230 V 50 Hz CH incl. 1 cartuccia 3M™ Penta™ Cartridge
Cartucce per 3M™ Pentamix™ 3 Automatic Mixing Unit	
69387	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Cartridge
69401	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body cartuccia
P3787	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Cartridge
P3792	3M™ Impregum™ Penta™ Cartridge
P3775	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick Cartridge
P3793	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft Cartridge
P3773	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft Quick Cartridge
P3795	3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft Cartridge
Prodotti correlati e accessori	
71507	3M™ Intra-oral Syringes Purple, 20 pz
77580	1 Dispenser Garant™ per cartucce 1:1/2:1
77601	Kit per montaggio a muro 3M™ Pentamix™ 3 Mixing Unit
30600	1 Adesivo per tray per polietere - 17 ml
77949	3M™ Penta™ Mixing Tips - Rosso, 50 pz.
71451	3M™ Garant™ Mixing Tips - Bianco, 50 pz.
71454	3M™ Garant™ Mixing Tips viola, 50 pz.
71461N	3M™ Garant™ Intra-oral Tips bianco, 50 pz.



www.3mitalia.it

3M Oral Care - 3M Italia srl - Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello (MI) - Tel. 02 7035 3537

3M, DuoSoft, Garant, Impregum, Penta e Pentamix sono marchi registrati di 3M Company o 3M Deutschland GmbH. Usato sotto licenza in Canada.

Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai relativi produttori. © 3M 2018. Tutti i diritti riservati.

I prodotti 3M™ Impregum™ sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario.